

Bruksanvisning norsk

EUROFLEX[®]

Arbeidsstol JUNIOR



Eurovema

Innhold

INNLEDNING	4
KONTAKTINFORMASJON	4
BRUKERINFORMASJON.....	4
SERVICE OG GARANTI.....	4
MONTERING VED LEVERANSE	5
SIKKERHETSREGLER	5
SYMBOLFORKLARING	6
ADVARSEL.....	7
RAPPORTERING AV ULYKKER ELLER HENDELSER	8
RENGJØRING.....	8
OPPBEVARING	8
ETIKETT	9
CE-MERKING	9
OVERSIKT MERKING	10
OVERSIKT SITTEENHET.....	11
OVERSIKT UNDERSTELL	12
RYGGSTØTTEHØYDE	13
Sidestøtte LS Rygg	13
RYGGSTØTTEVINKEL, MANUELL.....	14
RYGGVINKLING, ELEKTRISK.....	15
RYGGSTØTTE, SITTEDYBDE.....	16
SETEVINKLING, MANUELL	17
SETEVINKLING, GASSDREVET OG ELEKTRISK.....	18
ARMLENER, FASTE	19
ARMLENER, JUSTERBARE	20
SITTEHØYDE, MANUELL.....	21
SITTEHØYDE, ELEKTRISK	22
SETEROTASJON.....	23
FOTPLATEHØYDE	24
BENSTØTTE, HEL, FOTPLATEVINKEL	25
FOTPLATEVINKEL	26
DELT FOTSTØTTE, HØYDE.....	27
DELT BENSTØTTE, VINKEL.....	28
DELTE FOTPLATER, VINKEL	29
FOTRING	30

BREMSESPAK OG FOTBREMS	31
GENERELT OM LADING	33
LADERINDIKASJONER	34
TEKNISK INFORMASJON OM LADER	34
TEKNISK INFORMASJON OM ELEKTRONIKK	35
TEKNISKE DATA BATTERI	35
BATTERIBYTTET	35
TEKNISKE DATA, SETESYSTEM	36
TEKNISK INFORMASJON UNDERSTELL	36
TEKNISK INFORMASJON	36
MILJØFORHOLD	36
DESTRUKSJON	37

INNLEDNING

Vi gratulerer deg med valget av arbeidsstol! Vi håper du blir fornøyd med dette Euroflex-produktet fra Eurovema, som er konstruert og produsert i Gislaved i Sverige. Kontorstolen er konstruert for å innfri svært høye krav til ergonomi, sittekomfort og funksjon. Stolen har en rekke justeringsmuligheter for å kunne tilpasses ethvert behov. Les bruksanvisningen nøye, slik at du får utnyttet alle mulighetene ved stolen. Eurovema forbeholder seg retten til å endre denne håndboken og innholdet i den.

KONTAKTINFORMASJON

Produsent



Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige
Tlf/phone +46 371 390 100
www.eurovema.se
info@eurovema.se

BRUKERINFORMASJON

- Arbeidsstolen er klassifisert som et medisinteknisk produkt i klasse 1.
- Produktet er tiltenkt for bruk av personer som trenger hjelp til å forflytte seg, utføre sittende aktiviteter og som trenger hjelp til å reise seg fra stolen.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Ingen kontraindikasjoner er kjent.
- Maks. brukervekt 80 kg, avhengig av sittesystem.
- Ved tilpasning for tyngre brukere, kontakt Eurovema
- Produktet har en forventet levetid på ti år når det brukes i henhold til bruksanvisningen.
- Produktet er utviklet og testet av Eurovema samt tredjepartstestet ved et uavhengig testinstitutt. Eurovema er ansvarlig for at produktet er trygt å bruke.



Dette symbolet advarer om situasjoner som kan medføre risiko.



Les bruksanvisningen nøye.


SERVICE OG GARANTI

Hvis arbeidsstolen er i daglig bruk, bør den leveres inn til kontroll annenhvert år. Dette er for å kontrollere at funksjonene og sikkerheten opprettholdes gjennom hele levetiden. Forventet levetid er 10 år ved bruk i henhold til våre instruksjoner, vedlikeholdsintervaller og tiltenkte bruk. Ved behov for service kontaktes i første omgang den lokale hjelpemiddelsentralen.

Vi gir fire års garanti på metalledene av produktene våre og to års garanti på de øvrige delene, med unntak av trekk, hjul og batterier som har ett års garanti. Normal slitasje er ikke grunnlag for godkjent garanti. Vi anbefaler kundene våre å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen, instruksjoner om service og rekondisjonering. **Se servicehåndbok.**

MONTERING VED LEVERANSE

- Åpne emballasjen og kontroller at det ikke har oppstått skader under transport. Arbeidsstolen leveres med ryggstøtten og justerbare armlener umontert.
- Faste armlener er utstyrt med stoppskrue og ryggstøtten har en stoppeknott som skal trykkes inn ved montering og demontering for å forhindre at de kan løsne ved justering til endeposisjonen.
- Monter ryggstøtten og armlener i henhold til bildene og trekk til låsespaken (1)
- Monter stoppskruer (2) med stjerneskrutrekker.

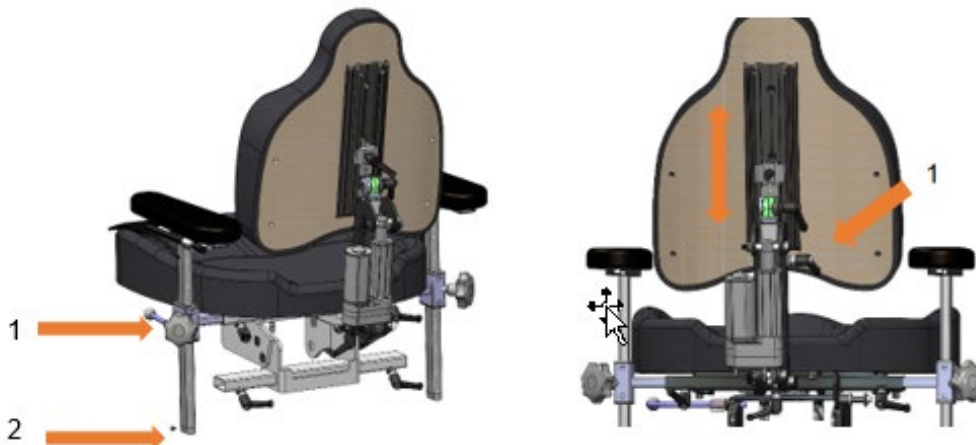

SIKKERHETSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk.
- Arbeidsstolen er beregnet for bruk på plane underlag i normalt innendørsklima.
- Vær forsiktig ved manuell justering av setevinkel mens du sitter i stolen, da det kan gi fare for fall ut av stolen.
- Hvis du oppdager skader eller endringer av stolens funksjon, skal serviceinstansen (hjelpemiddelsentralen) kontaktes umiddelbart.
- Hvis stolen brukes regelmessig, bør den med jevne mellomrom leveres til serviceinstansen for kontroll.
- Vær nøye med å trekke til låsespaker og skruer ordentlig etter at justeringer er gjort.
- Pass på at ikke skruer eller deler løsner, da det kan påvirke sikkerheten. Kontakt serviceinstans umiddelbart.
- Service og vedlikehold kan kun utføres av personell som er autorisert av Eurovema.
- Kun originaldeler fra Eurovema kan brukes.
- Stolen skal ikke utstyres med tilbehør eller komponenter som ikke er godkjent av Eurovema.
- Ikke overskrid den angitte maksimale brukervekten.
- Kontroller at stoppskruer er montert på armlenene og stoppeknott på innfestingen av ryggstøtten. Dette forhindrer at de kan løsne ved justering til endeposisjonen.
- Brukere skal ikke under noen omstendigheter sitte i stolen under service, med unntak av ved bytting av armlener og benstøtte hvis det er mulig å sørge for at brukeren ikke vil falle ut av stolen.



Stol med regulerbar setetilt skal være i fastgjort og bremset stilling når man setter seg eller reiser seg.

SYMBOLFORKLARING

 Advarsel	 Les bruksanvisningen
 Advarsel klemfare	 Setevinkling
 Kan ikke strykes	 Ryggvinkling
 Tåler ikke sterkere kjemiske midler enn perkloretylen	 Ryggghøyde
 Blekemidler med klor skal ikke brukes	 Sittedybde
 Kan ikke has i tørketrommel	 Armlene, høyde
 Maskinvask, 60°	 Styreknapp, elektrisk funksjon
 Må beskyttes mot fukt	 Ladekontakt
 Må behandles forsiktig	 Inngang styring
 Denne side opp	 Safe Working Load
 Tillatt temperatur	 Applied Part type B
 Tillatt relativ fuktighet	
 Tillatt høyde over havet	
 Produksjonsdato	
 Produsent	
 Kun for innendørs bruk	
 Maksimal brukervekt	
 Serienummer	
 CE-merking viser overensstemmelse med europeiske regelverk	
 Elektriske komponenter må leveres til en egnet resirkuleringsstasjon	
 Produktet er en del av et resirkuleringssystem	
 Komponentvekten overskrider 10 kg	
 Arbeidssyklus	

ADVARSEL



Hvis produktets ytelse forringes eller forandres, må bruken av det øyeblikkelig opphøre. Kontakt en serviceinstans (hjelpemiddelsentral) eller Eurovema Mobility AB umiddelbart. Produktet skal ikke tas i bruk før en autorisert tekniker har undersøkt det.



Produktet skal ikke belastes med en høyere vekt enn den angitte maksimale brukervekten, siden dette kan resultere i at komponenter skades og fører til ulykker.



Kontroller at parkeringsbremsen på produktet er aktivert når du setter deg eller reiser deg. Det kan ellers være risiko for at produktet utilsiktet ruller vekk og at du faller.



Modifikasjoner av produktet skal kun utføres av en autorisert tekniker i samråd med foreskrivaren. Ved behov for individuell tilpasning, kontakt hjelpemiddelsentral eller Eurovema Mobility AB. Hvis produktet modifiseres, vil CE-merkingen ikke lenger gjelde, og Eurovema tar ikke lenger ansvar for produktet. Modifiseringer som utføres av en autorisert tekniker etter avtale med Eurovema, kan beholde CE-merkingen.



For å beholde CE-merkingen, kan reparasjoner og teknisk service kun utføres av personell som er autorisert av Eurovema Mobility AB.



Produktet er beregnet for å brukes av den personen og for det formålet som det er foreskrevet for. Produktet installeres for denne personen, og disse innstillingene skal ikke endres av andre enn den som foreskrev produktet. Hvis en annen bruker skal ta over produktet, må en ny tilpasning gjøres.



Produkter med elektrisk seteløfter kan i noen tilfeller få en sitte høyde som er så høy at brukeren ikke når ned til gulvet med føttene, hvilket kan gi en risiko for fall hvis brukeren reiser seg fra denne stillingen.



Produktets komponenter og deler må monteres i henhold til monteringsanvisninger for å sikre at delene ikke løsner. Alle kabler skal festes med buntband.



For å beholde CE-merkingen, kan produktet ikke utstyres med komponenter eller tilbehør som ikke er godkjent av Eurovema Mobility AB.



Utelukkende elektriske komponenter som er beregnet for bruk med produktet, kan kobles inn i produktets styresystem. Innkobling av komponenter i styresystemet skal utføres av en autorisert tekniker.



For å beholde CE-merking og garanti, kan det kun brukes ladere og batterier som er beregnet for bruk med produktet og levert av Eurovema Mobility AB.



Produkt med elektriske funksjoner kan forstyrres av mobiltelefoner eller annet utstyr som bruker RF-kommunikasjon.



Produktets metalloverflater kan bli varme om de blir utsatt for sterkt sollys, og om huden kommer i kontakt med dem kan brannskader oppstå. Utsett ikke produktet for sterkt sollys over lang tid.



Produktet har mange små detaljer og skruer som utgjør en kvelningsrisiko for barn og husdyr om de skulle løsne.



Enkelte konfigurasjoner av produktet inkluderer kabler og vaiere som ikke kan sikres fullstendig på grunn av sin funksjon. Disse kan medføre strupingsrisiko for små barn.



Bruk av elektriske setefunksjoner medfører klemrisiko for barn og husdyr. Påse alltid at ingen andre enn du som bruker produktet er i direkte nærhet av det når elektriske funksjoner brukes.



På produkter med elektrisk brems er det viktig at batteriet ikke lades helt ut, siden dette vil føre til at den elektriske bremsen ikke fungerer. Hvis den er i frigjort stilling, kan den da rulle av gårde når du setter deg eller reiser deg og medføre en fallrisiko.

RAPPORTERING AV ULYKKER ELLER HENDELSER

Produsenter av medisintekniske produkter innen EU har ansvar for å systematisk følge opp hvordan produktene fungerer i praktisk bruk.

CE-merkingen er basert på risikoanalyser og utprøving, og tiltak er iverksatt for å minimere identifiserte risikoer så langt som mulig. Hvis ulykker og hendelser likevel inntreffer, må de rapporteres til Eurovema Mobility AB og ansvarlig nasjonal tilsynsmyndighet.

RENGJØRING

Tørk av flatene på arbeidsstolen med en klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel av typen oppvaskmiddel. Plasser stolen slik at den står støtt, og sett på bremsen. Setetrekket kan rengjøres med et av tøyvaskemidlene som finnes på markedet. Overtrekk kan vaskes i maskin på 60°.



Vær oppmerksom på at rengjøring bør gjøres på en romslig overflate og ikke i nærheten av åpen ild.


OPPBEVARING

Kontorstolen skal oppbevares i et tørt og romtemperert miljø. Unngå at stolen utsettes for høy varme, sterk kulde eller intensiv sol. Metallflater kan bli svært varme hvis de utsettes for solskinn. Ved sterk kjøling må stolen oppnå romtemperatur før bruk. Utsett heller ikke stolen for vann, andre væsker eller kjemikalier.

ETIKETT


Etiketten på produkten inneholder viktig informasjon.

- 1) Produktnavn
- 2) Artikkelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Strekkode
- 5) Maks. brukervekt
- 6) Medisinteknisk produkt
- 7) CE-merking
- 8) Les håndboken før bruk
- 9) Produksjonsdato
- 10) Produsentens navn

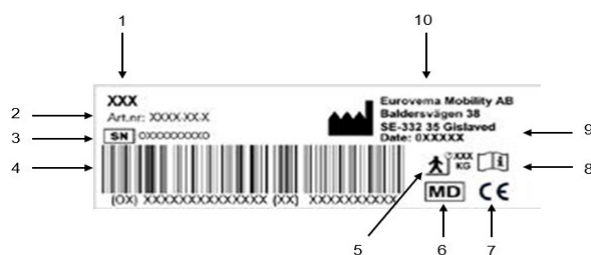

SEKUNDÆR ETIKETT

- 1) Applied part type B
- 2) Periodisk funksjon 2 / 18 min
- 3) Tillatt romtemperatur
- 4) Tillatt relativ luftfuktighet
- 5) Kun innendørs bruk
- 6) Tillatt høyde over havet
- 7) Safe Working Load

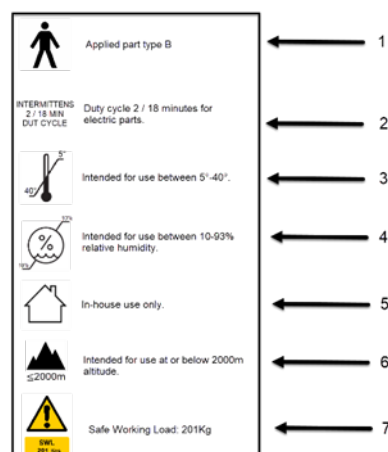

CE-MERKING

Produktet er CE-merket i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). Du finner CE-merket på etiketten. Produktet oppfyller kravene i standarden

EN1335-2:2018 Arbeidsstoler, sikkerhetskrav

EN 60601-1:2006 Elektromedisinsk utstyr – del 1: Generelle krav til sikkerhet og vesentlige ytelser.

60601-1-2:2014 Elektromedisinsk utstyr – sikkerhet – Del 1 – 2 Generelle krav til sikkerhet og vesentlige ytelser – Tilleggsstandard for elektromagnetiske forstyrrelser.

SS-EN 1021-2:2014 Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 2: Antennelseskilde: Gassflamme tilsvarende en brennende fyrstikk.

SS-EN 1021-1:2014 Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 1: Antennelseskilde: Ulmende sigarett.

SS-EN ISO 21856:2022 Hjelpemidler – Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr.

OVERSIKT MERKING



Klemrisikoer angis sammen med instruksjonene for de enkelte funksjonene om funksjonen kan medføre klemrisiko. Merking er angitt på stolen der det er klemrisiko.

OVERSIKT SITTEENHET


- 1) Sete
- 2) Ryggstøtte
- 3) Armlene
- 4) Understell
- 5) Seteløfter
- 6) Benstøtte

Alternative sittesystemer og benstøtter finnes.



OVERSIKT UNDERSTELL

- 1) Forhjul
- 2) Bremset hjul
- 3) Parkeringsbremsespak
- 4) Fotbrems
- 5) Understell Junior 52
- 6) Bremsestang

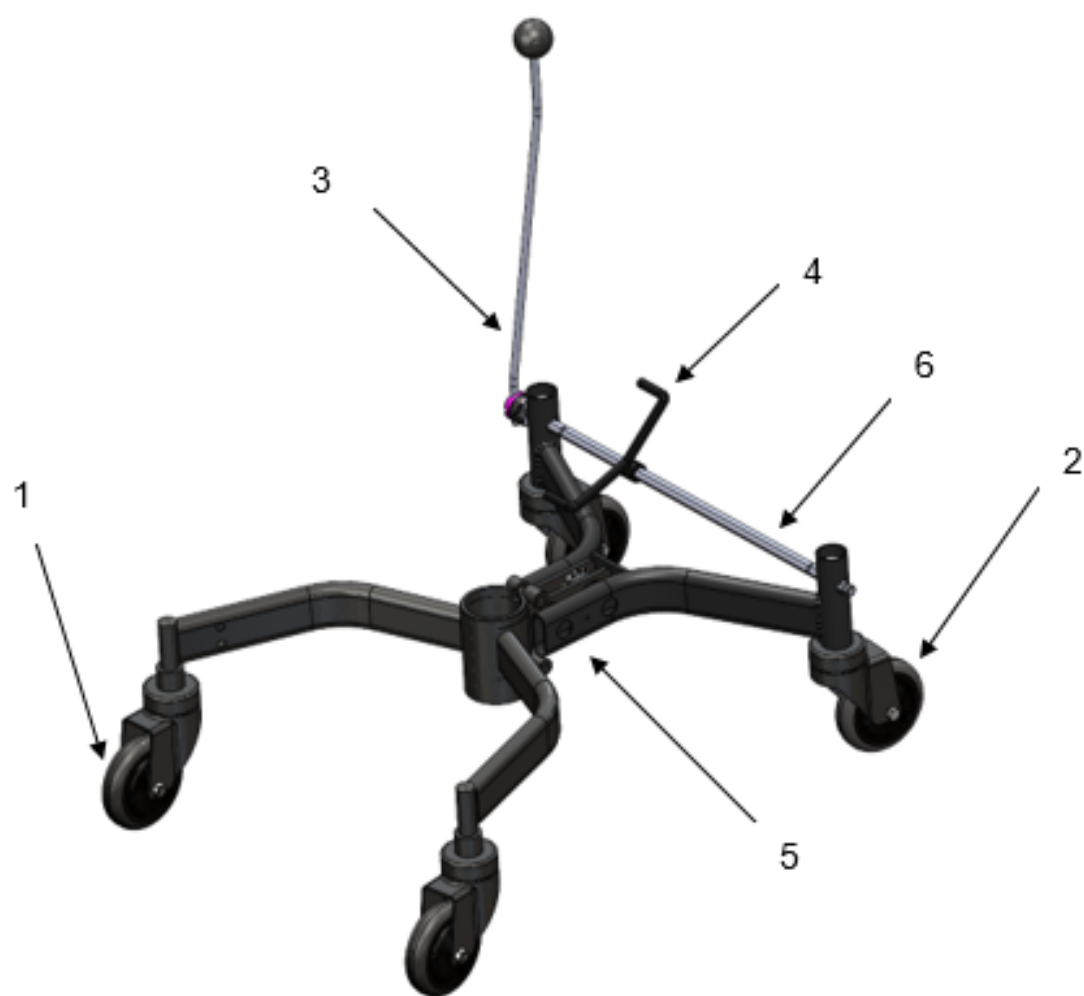


RYGGSTØTTEHØYDE

Høyden på ryggstøtten kan justeres med en skrue og en spak.

- 1) Løsne spaken ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining mot klokken.
- 2) Still inn ønsket høyde.
- 3) Lås ryggen ved å vri spaken $\frac{1}{2}$ omdreining med klokken.
- 4) For ytterligere høydejustering, løsne justeringsskruen noen omdreininger.
- 5) Still inn ønsket høyde.
- 6) Stram justeringsskruen til låst stilling.


Justeringskruen kan skiftes ut med låseknott

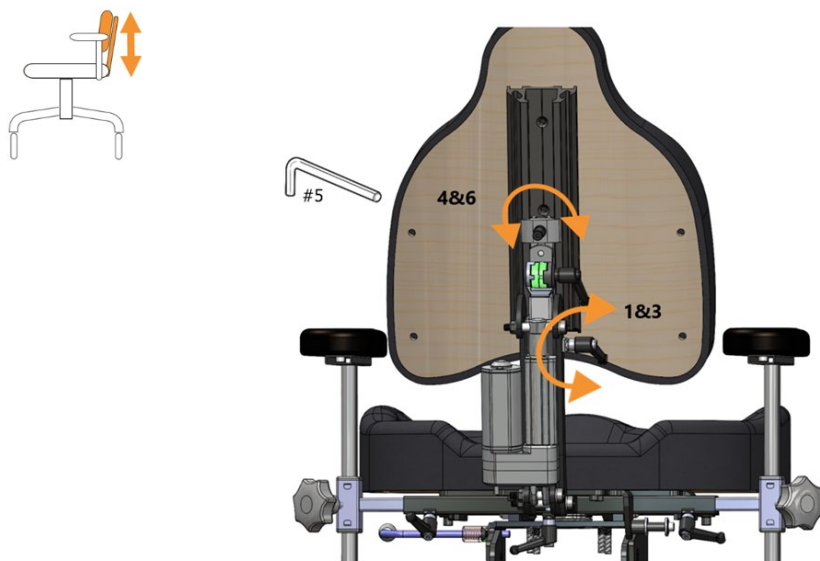

Sidestøtte LS Rygg

Sidestøttene kan justeres horisontalt.

- 1) Løsne skruene noen omdreininger med en 4 mm unbrakonøkkel.
- 2) Juster til ønsket bredde.
- 3) Trekk til skruene.

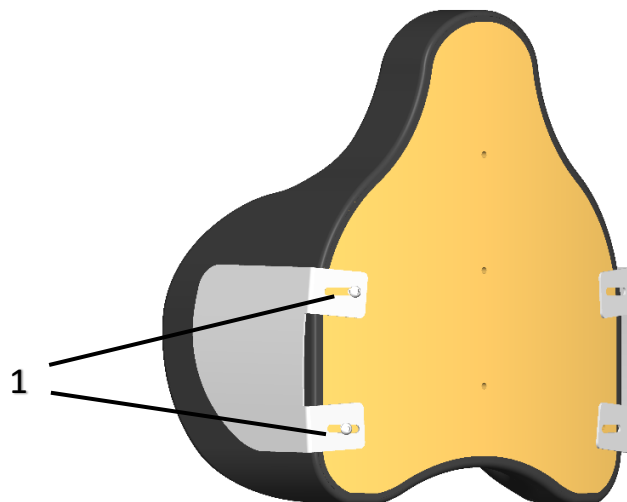

RYGGSTØTTEVINKEL, MANUELL

Ryggvinkelen og ryggputen kan justeres hver for seg.

Ryggvinkling



- 1) Løsne sikkerhetsskruen og spaken for å justere vinkelen på hele ryggmekanismen forover eller bakover.
- (2) Still inn ønsket ryggvinkel.
- 3) Lås sikkerhetsskruen og spaken

Ryggpute

- 4) Løsne spaken ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining mot klokken.
- 5) Still inn ønsket ryggputevinkel.
- 6) Lås spaken ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining med klokken.



Utvis forsiktighet på grunn av klemfare

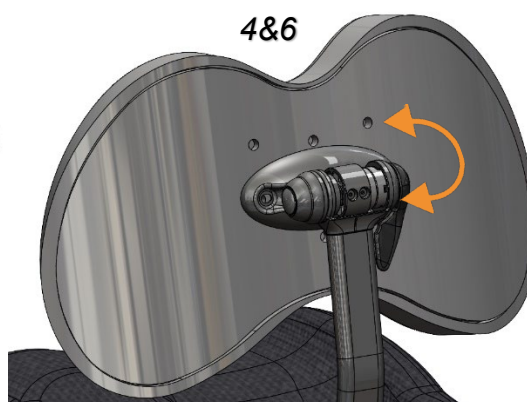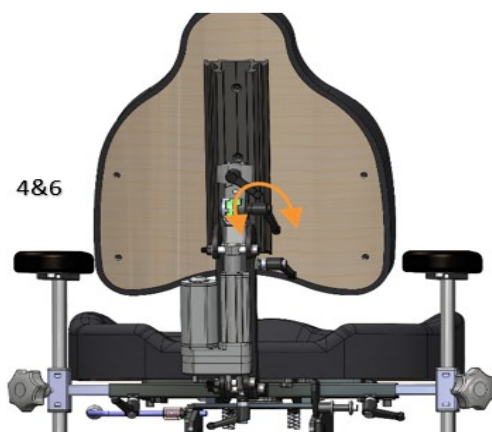


RYGGVINKLING, ELEKTRISK

Vinkelen på ryggmekanismen kan justeres elektrisk.

- 1) For å justere vinkelen bakover, skyv vippestrømbryteren oppover.
- 2) For å justere vinkelen fremover, skyv vippestrømbryteren nedover.



Juster ikke ryggvinkelen i umiddelbar nærhet av en annen person, grunnet klemfare.

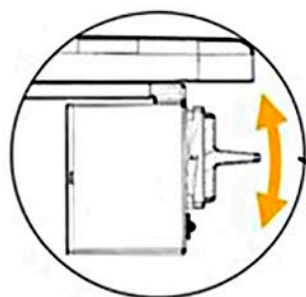

1&2



RYGGSTØTTE, SITTEDYBDE

Sittedybden kan justeres ved hjelp av ryggstøtten. Still inn ønsket sittedybde ved å flytte ryggstøtten forover eller bakover. Finjustering kan også gjøres ved å justere ryggvinkelen.

- 1) Løsne låseknotten, alternativt skruen under den bakre delen av setet.
- 2) Skyv inn eller dra ut ryggmekanismen til ønsket sittedybde.
- 3) Trekk til låsespaken/skruen.
- 4) For finjustering ved hjelp av ryggvinklingen, se forrige avsnitt om ryggvinkel



1&3

SETEVINKLING, MANUELL


Vinkelen på setet kan justeres på flere måter. Manuelle tiltemekanismer er: Strekkfisk (1) og sveiv (2).

1) Strekkfisk justeres med en fastnøkkel på 17 mm.

2) Sveivvinklingen justeres gjennom å vri på knotten. Vri i retning med klokken for å tilte forover. Vri i retning mot klokken for å tilte bakover.



Sørg for at ingen kan komme i klem under justering av setetilt.

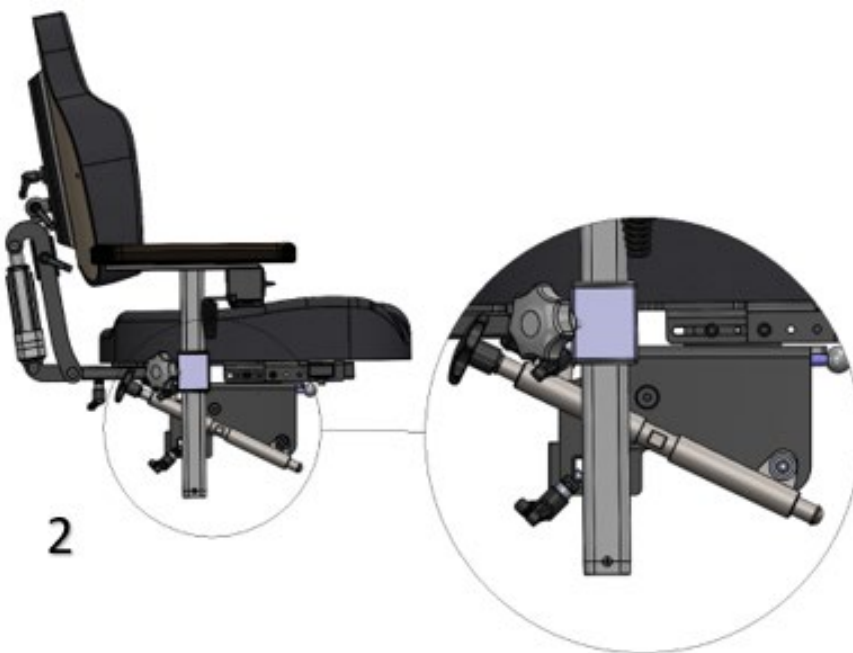


SETEVINKLING, GASSDREVEVET OG ELEKTRISK

3) Gassdrevet setevinkling reguleres under armlenet. For å justere setevinkelen trykkes hendelen oppover mot armlenet og slippes når setet er i ønsket vinkel. Hendelen er flyttbar fra høyre til venstre side.

4) Elektrisk setevinkling justeres med bryteren under armlenet, alternativt med håndkontroll. Se separate instruksjoner for håndkontroll.



Sørg for at ingen kan komme i klem under justering av setetilt.

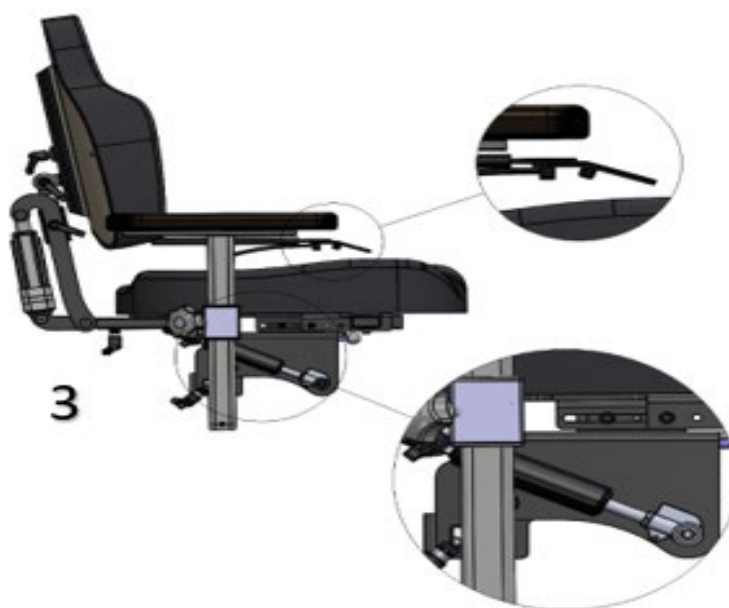

ARMLENER, FASTE

- 1) For justering av høyden, løsne knotten **1)** ved å vri den noen omdreininger mot klokken, og still inn ønsket høyde.
- 2) Trekk til knotten i retning med klokken.
- 3) For justering av bredden, løsne spaken **2)** ved å vri den $\frac{1}{2}$ omdreining mot klokken, og juster til ønsket bredde.
- 4) Trekk til spaken i retning med klokken.



ARMLENER, JUSTERBARE

Armlenet kan felles bakover gjennom å dra den fjærende reguleringshendelen **1**) oppover og samtidig felle armlenet bakover.


1) Høydejustering av armlenet gjøres ved at spaken eller skruen **2**) løsnes med en ½ omdreining mot klokken. Hvis armlenet har en skrue, brukes unbrakonøkkel nr. 5

2) Trekk til spaken eller skruen **2**) med klokken når ønsket høyde er oppnådd.

3) For justering av bredde, se forrige avsnitt.



Sørg for at ingen kan komme i klem når armlenet felles ned

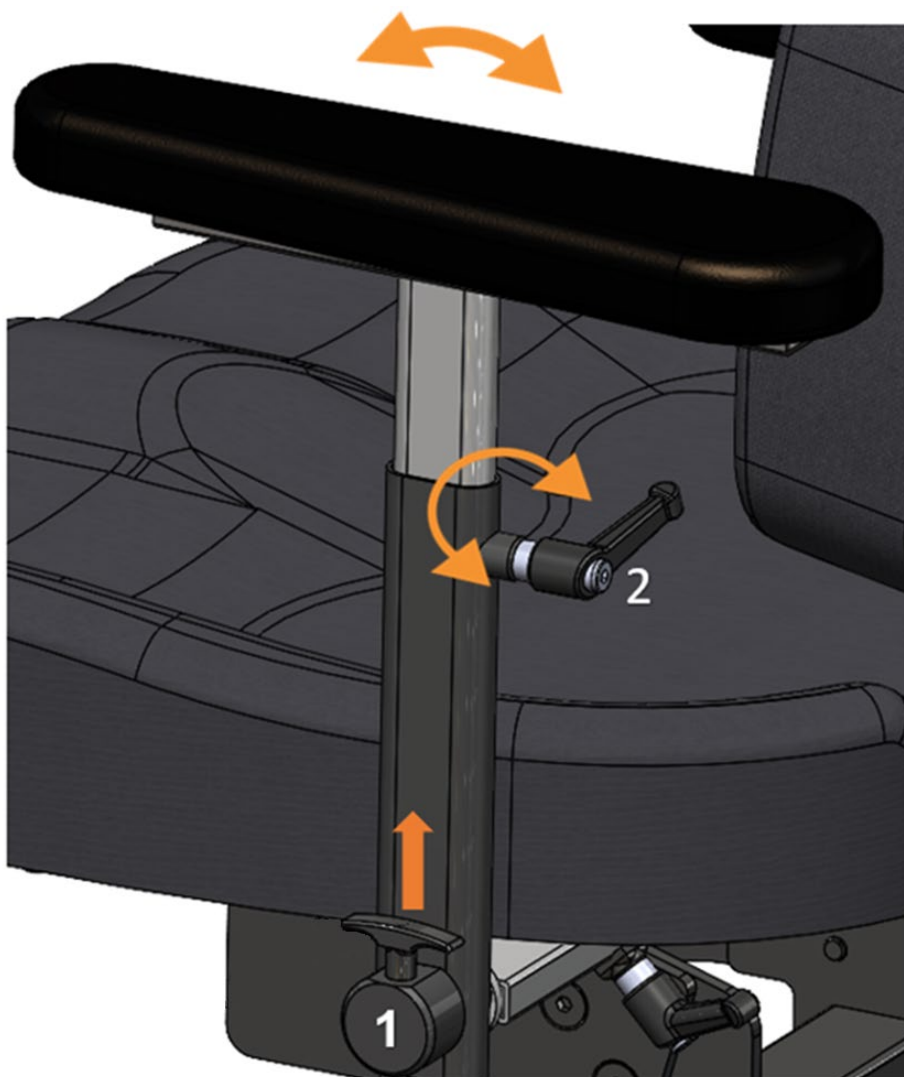


SITTEHØYDE, MANUELL

- 1) Heving og senkning av sittehøyden gjøres gjennom å skyve spaken **1** nedover. For å senke tynges setet ned med kroppsvekten. Spaken skal samtidig holdes i nedtrykt stilling.
- 2) Når ønsket sittehøyde er oppnådd, slippes spaken tilbake.



Vær forsiktig ved senkning slik at ingen personer eller gjenstander kommer i klem ved heving av setet. Når stolen står under et bord eller en plate, kan hender eller ben klemmes.

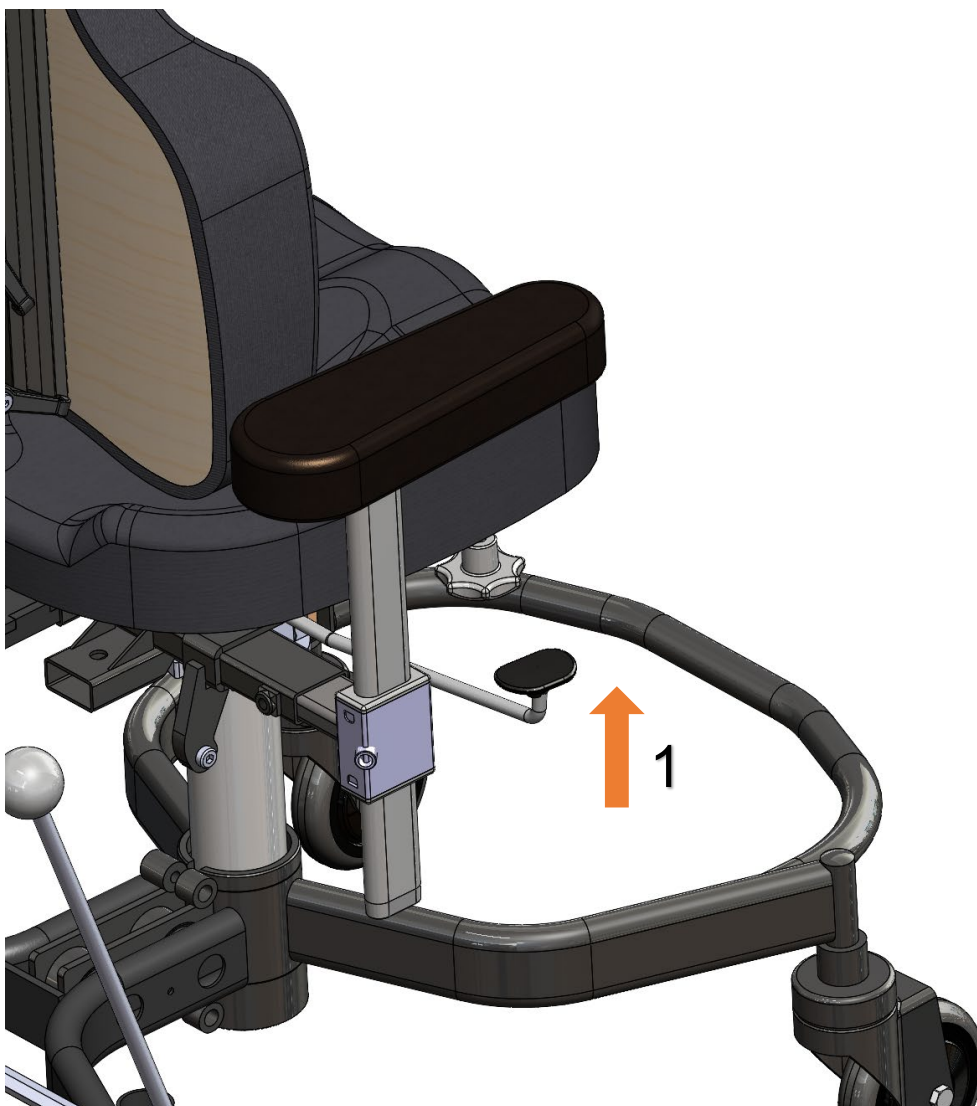

SITTEHØYDE, ELEKTRISK

1) Heving og senkning av sitte høyden gjøres ved å skyve vippestrømbryteren oppover for å heve og nedover for å senke sitte høyden.
Alternativt finnes håndkontroll som ekstrautstyr.




Vær forsiktig ved senkning slik at ingen personer eller gjenstander kommer i klem ved heving av setet. Når stolen står under et bord eller en plate, kan hender eller ben klemmes.



SETEROTASJON

Rotasjon av setet kan fås som ekstrautstyr. Setet kan roteres 90° i begge retninger, med en mellomstilling på 45 grader. Brems stolen først. Skyv spaken oppover samtidig som setet vris. Slipp spaken når setet er i ønsket stilling.

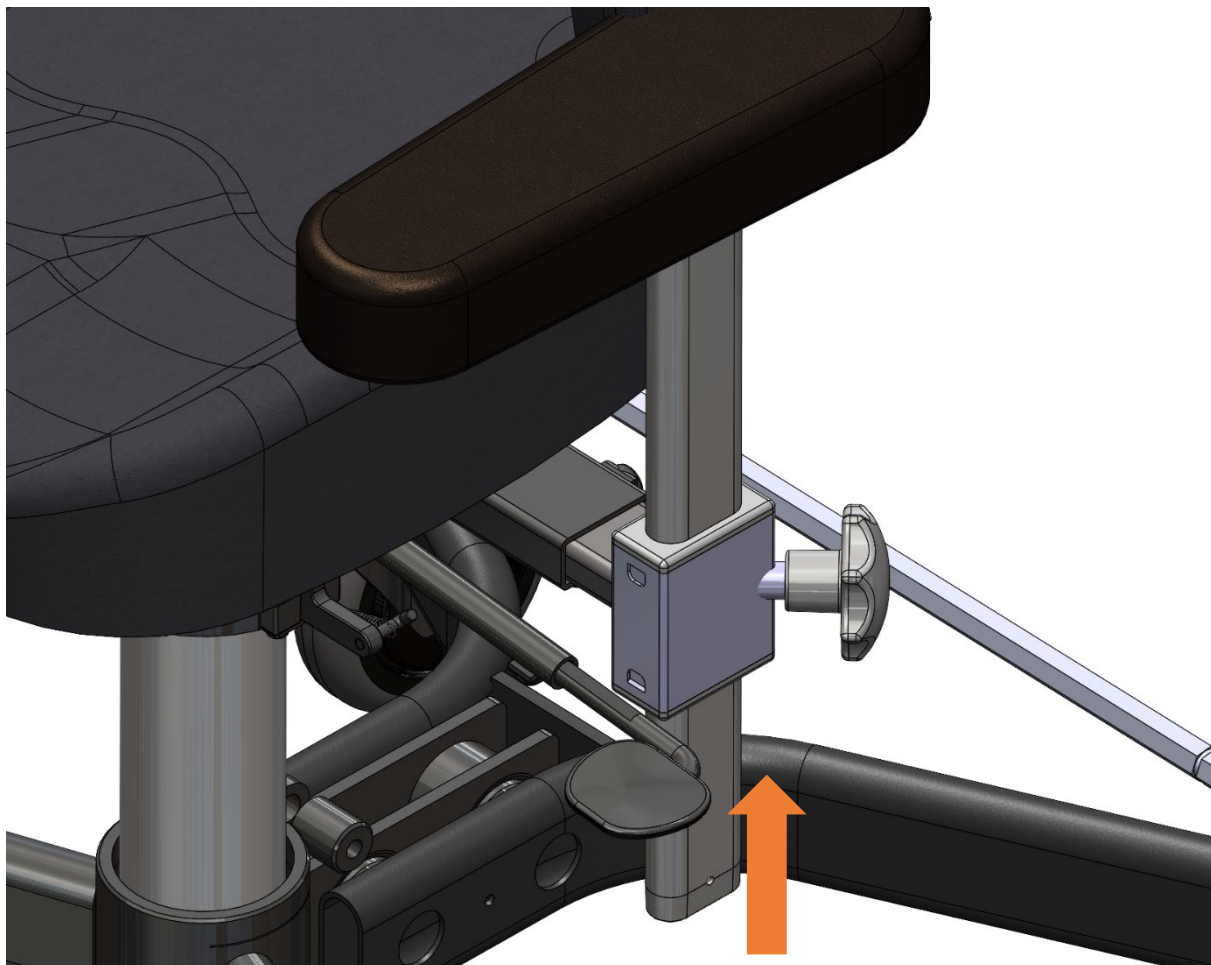

FOTPLATEHØYDE

- 1) Løsne sikkerhetsskruen **1** noen omdreininger med unbrakonøkkel nr. 4
- 2) Løsne skruen **2** noen omdreininger og juster til ønsket høyde med unbrakonøkkel nr. 5
- 3) Trekk til skruen **2** og sikkerhetsskruen **1**



Stå ikke på fotplaten. Stolen vil vippe framover.



BENSTØTTE, HEL, FOTPLATEVINKEL

- 1) Løsne skruen **1** noen omdreininger med unbrakonøkkel nr. 5
- 2) Juster til ønsket vinkel.
- 3) Trekk til skruen.



Stå ikke på fotplaten, stolen vil vippe framover




FOTPLATEVINKEL

Vinkelen på fotplaten kan justeres horisontalt. For å vinkle den nedover, skrus skruen mot klokken med unbrakonøkkel nr. 4 til ønsket vinkel er oppnådd. For vinkling oppover, skru i retning med klokken.



Stå ikke på fotplaten, stolen vil vippe framover

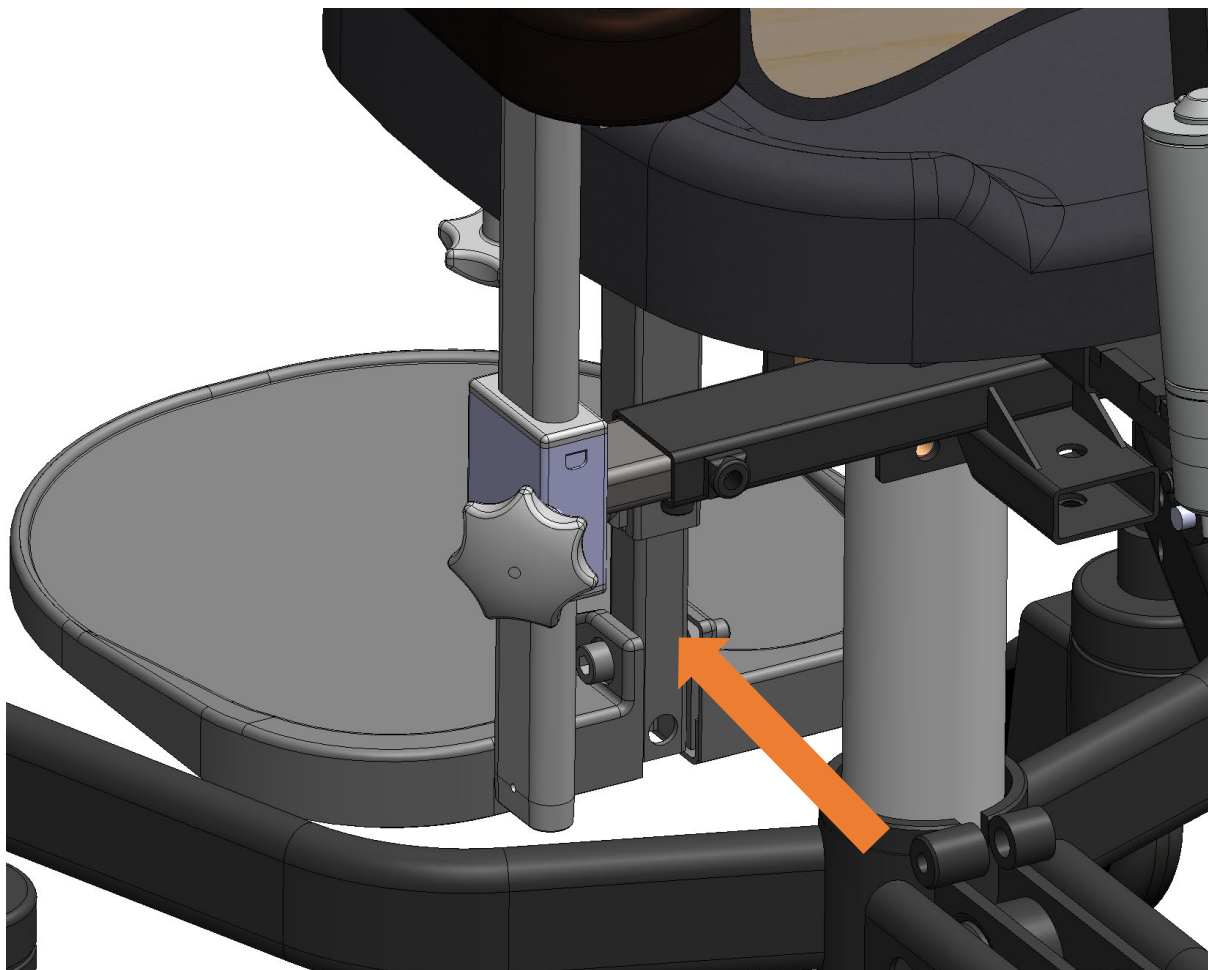

DELT FOTSTØTTE, HØYDE

- 1) Løsne skruen **1**) helt med unbrakonøkkel nr. 5 og juster fotplaten til ønsket høyde.
- 2) Når ønsket høyde er oppnådd, sett skruen tilbake på plass og stram den.



Stå ikke på fotplaten, stolen vil vippe framover



DELT BENSTØTTE, VINKEL

Vinkelen på benstøttene er justerbar. Løsne skruen noen omdreininger med unbrakonøkkel nr. 5. Juster til ønsket stilling og trekk skruen til.



Stå ikke på fotplaten, stolen vil vippe framover



DELTE FOTPLATER, VINKEL

Fotplatens vinkel er justerbar for å finne en behagelig vinkel for foten. Løsne skruen¹ noen omdreininger med unbrakonøkkel nr. 5, og juster vinkelen. Stram skruen når ønsket vinkel er oppnådd.

Fotplaten kan vippes opp uten verktøy for å gjøre det lettere å sette seg i og reise seg fra stolen. Se bilde 2



Stå ikke på fotplaten, stolen vil vippe framover



FOTRING

Fotplaten kan vippes bakover for å gjøre det lettere å sette seg i og reise seg fra stolen.



Vipp fotringen vekk før du reiser deg fra stolen for å unngå fall.



BREMSESPAK OG FOTBREMS

Bremsespak


Brems stolen ved å føre bremsespaken forover. Frigjør bremsen ved å føre spaken bakover igjen.

Fotbrems

Brems stolen ved å tråkke på den fremste delen av pedalen. Frigjør bremsen ved å tråkke på den bakre delen.



Brems alltid stolen før du setter deg eller reiser deg fra stolen.

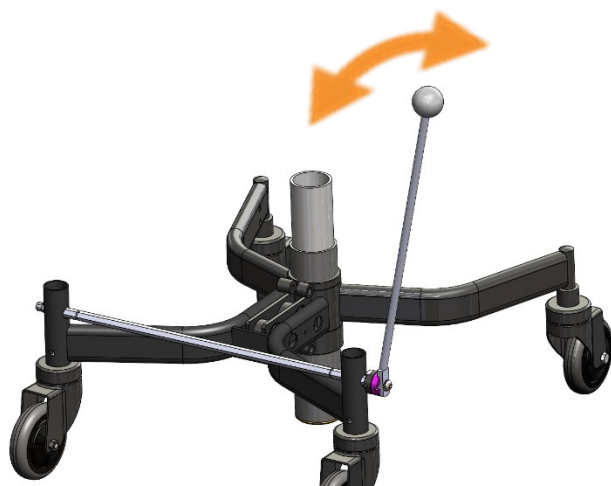

Vinkelen på bremsespaken kan justeres, og spaken kan flyttes fra en side til den andre.


Justering av vinkel.

Løsne skruen noen omdreininger for å frigjøre kulelåsen.

Obs! Spaken skal ikke løsnes helt.

Juster vinkelen på spaken til ønsket stilling og stram skruene godt til.

Sjekk at spaken sitter godt fast i den ønskede stillingen.

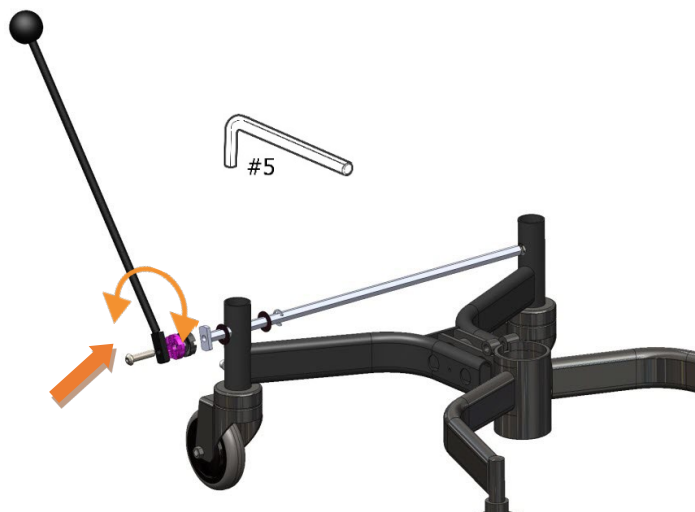

Flytt bremsespaken til den andre siden.


Løsne låseringen 1)

Dra bremsestangen ut av understellet. Ta vare på plastskiven ved låseringen for å bruke den til monteringen på den andre siden.

Skyv inn bremsestangen fra siden spaken skal festes på. Monter plastskiven på innsiden av understellet, og skyv deretter inn bremsestangen hele veien gjennom understellet.

Monter deretter låseringen med plastskiven, som skal plasseres nærmest understellet.

Juster vinkelen på spaken i henhold til avsnittet ovenfor.

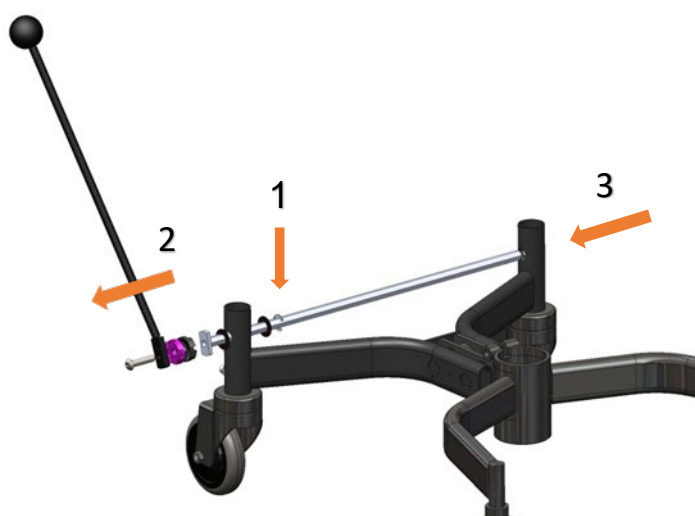

GENERELT OM LADING

For å opprettholde batteriets fulle ytelse så lenge som mulig er det viktig at det lades regelmessig. Ved gjennomsnittlig bruk er et anslag at opplading bør gjøres annenhver dag. Hvis det er mulig, bør ladingen gjøres på dagtid. Stolens funksjoner kan ikke brukes under lading. Ved langtidslagring bør batteriet lades hver fjerde uke for å ikke tømmes til det kritiske nivået der laderen ikke kan starte ladingen. Under lading, plasser stolen slik at ladekontakten enkelt kan settes inn og tas ut.




Ikke la ladingen foregå i lange perioder uten avbrudd – maksimalt fire uker sammenhengende. La heller ikke ladekontakten sitte igjen i ladeuttaket på stolen etter avsluttet lading.



Regelmessig lading er spesielt viktig for stoler med elektrisk brems, elektrisk setevinkling og elektrisk ryggvinkling, for å sikre at det alltid er mulig å komme seg ut av stolen på en trygg måte.

- 1) Stolen må lades når lysdioden **3** lyser kontinuerlig uten at en funksjon er i bruk. Lysdioden tennes når en elektrisk funksjon brukes og viser at det er tid for å lade.
- 2) Koble kontakten på laderen **2** til uttaket på stolen **1**. Lysdioden på laderen lyser grønt.
- 3) Koble laderen til strømmettet via et veggstøpsel på 220 V. Lysdioden på laderen går over til å lyse kontinuerlig gult.
- 4) Når ladingen er ferdig, går lysdioden på laderen over til å lyse kontinuerlig grønt
- 5) Ta laderen ut av veggstøpset, og deretter kontakten ut av stolen.

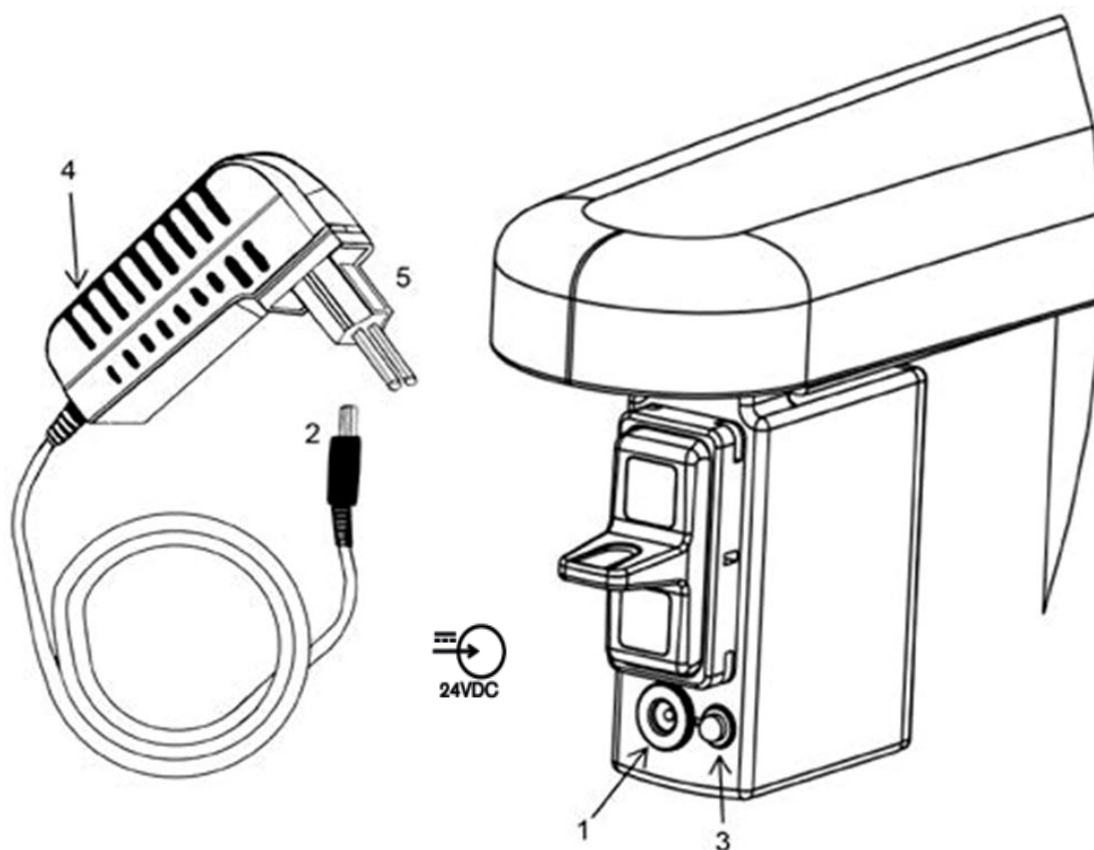

LADERINDIKASJONER

Lader med maksimal strøm



Topplading, konstant spenning. Blinker gult



Ferdigladet, vedlikeholdslading



Batteriet er ikke tilkoblet. Blinker grønt



Feilkoder

2 røde blink - batteri tilkoblet med feil polaritet.

3 røde blink - laderuttaket kortsluttet

4 røde blink - batterispenning er for lav

5 røde blink - for lang ladetid

6 røde blink - ødelagt batteri

Lysdioden slukket - batterispenning er for høy



TEKNISK INFORMASJON OM LADER

MASCOT 3743

Data	Fakta
Inngangsspenning	100–240 VAC 50–60 Hz
Inngangsstrøm	Maks. 0,5 A
Utgangsstrøm	0,56 A
Utgangsspenning	29,4 V DC maks.
Driftstemperatur	–25 – +40 °C
Beskyttelsesklasse	Klasse 2
Kapslingsgrad	IP 41

TEKNISK INFORMASJON OM ELEKTRONIKK

Data	Fakta
Inngangsspenning	24V-40V
Maks. utgangsstrøm	14A
Normal driftsspenning	21–28,5 V
Maks. motorstrøm per motor	3,5A
Strømforbruk i standby	200uA
Direktiv	RoHS 2011/65/EU
Beskyttelsesklasse	Klasse 2
Kapslingsgrad	IP21
Arbeidssyklus	Periodisk på 2 min / av 18 min

TEKNISKE DATA BATTERI

FGS20121A

Data	Fakta
Batteri	2 stk. seriekoblede 12 V 1,2 Ah
Batteritype	AGM
Maks. utladningsstrøm	18 A i 5 sekunder
Material i kapsling	ABS UL94 HB
Material i batteriboks	Xantar FC19R UL94 V.0
Driftstemperatur lading	–15 til 40 °C
Driftstemperatur utlading	–15 til 50°C

BATTERIBYTTE

Ved bytting av batteri erstattes hele batteriboksen. Se monteringsveiledning for batteribytte.



Reparasjoner og andre inngrep på batteriet kan bare utføres etter godkjenning av Eurovema. Batteriboksen skal ikke åpnes. Kun batterier godkjent av Eurovema kan brukes.

TEKNISKE DATA, SETESYSTEM

Data	Fakta
Sete (bredde×dybde)*	29×32, 32×36, 36×40, 36×45, 40×40, 40×45 **32×36, 36×40, 40×40, 40×46
Sittebredde mellom armlenene	27–52cm
Sittedybde	32–45cm
Sittehøyde, gassdrevet (høyde til setets underside)	37,5–47, 41–56, 48–68 cm
Sittehøyde, strømdrevet (høyde til setets underkant)	41–57, 45–70cm
Setetilt, strøm- og gassdrevet	-20 til 12°
Setetilt, sveiv og strekkfisk	-16 til 20°
Ryggstøtthøyde, justerbar*	37–54cm
Rygg (bredde×høyde)*	30x37, 37x43cm ***17×37, 24×43, 28×45 ** 28×20, 32×20, 32×35, 28×33, 32×42
Ryggvinkling	30°
Armlenehøyde, justerbar	0–26cm
Armleneplate, barn	25×8×3 cm
Møbeltrekk	Svart Atlantic

*Avhengig av modell

**ABC-sete og -rygg

***SitRite LS-rygg

TEKNISK INFORMASJON UNDERSTELL

Data	Fakta
Understell, bredde	52cm
Understell, lengde	55cm
Brems	Understellsmontert
Hjul, diameter	100mm

TEKNISK INFORMASJON

Data	Fakta
Klasse	Arbeidsstol – ISO 180903
Vekt, elektrisk	35kg
Vekt gassdrevet	34kg
Brukervekt, maks.	80kg
Batteri	24 V 1,2 Ah AGM
Sikker arbeidslast (SWL)	95kg

MILJØFORHOLD

Forhold	Temperatur	Luftfuktighet	Lufttrykk
Vanlig bruk	5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kPa
Oppbevaring og transport	–5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kPa

DESTRUKSJON

Produkter som tas ut av bruk permanent, skal demonteres og kildesorteres. Instruksjoner for montering og demontering finnes på hjemmesiden under avsnittet Monteringsanvisninger. Sprengskisser er også tilgjengelige under avsnittet Sprengskisser på hjemmesiden www.eurovema.se

Privatpersoner må kontakte Eurovema for mer detaljert informasjon. Eurovema vil da ta på seg ansvaret for destruksjonen.

Demonterte komponenter sorteres i henhold til **tabellen nedenfor**.



Demontering av produktene er ikke risikofritt. Ved feil håndtering er det risiko for klemskader og brannskader. Demontering skal utføres av en autorisert tekniker. P

Metall	Elektronikk	Brennbart
Understell	Styringselektronikk	Seter
Setekryss	Koblingsbokser	Ryggstøtte
Ryggmekanisme	Kabler	Armleneputer
Armlenestenger	Håndkontroller	Overtrekk i tøy
Benstøtte	Vipperegulering	Nakkestøtteputer
Festedetaljer på tilbehør	Batteriboks, batterier må adskilles	Bolstøtteputer
Gassdrevet seteløfter	Elektrisk aktuator	Andre polstrede detaljer
Fotring	Elektrisk hevesøyle	

Batterier

Kasserte blybatterier skal leveres til miljøstasjon.

