

Alkuperäinen käyttöohje ruotsiksi

EUROFLEX®

Työtuoli EXL



Eurovema

Sisällysluettelo

JOHDANTO.....	4
YHTEYSTIEDOT	4
KÄYTTÄJÄTIEDOT	4
HUOLTO JA TAKUU	4
ASENNUS TOIMITUSHETKELLÄ	5
TURVALLISUUSOHJEET	5
SYMBOLIEN SELITYKSET.....	6
VAROITUS	7
ONNETTOMUUKSISTA TAI VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN	8
PUHDISTUS	8
SÄILYTYS	8
PÄÄETIKETTI	9
TOISSIJAINEN ETIKETTI	9
CE-MERKINTÄ	9
MERKINNÄT TUOTTEESSA	10
TUOLIN EXL YLEISKATSAUS.....	11
SELKÄNOJAN KORKEUS	12
SELKÄNOJA - SELKÄTYYNYN KALLISTUS.....	13
SELKÄNOJA - ISTUINSYVYYS.....	14
ISTUIMEN KALLISTUS.....	15
KYYNÄRNOJAT - ASETUKSET	16
ISTUINKORKEUS.....	17
MANUAALINEN ISTUIMEN NOSTO	18
JALKALEVY	19
JAETTU JALKATUKI.....	21
JAETTU JALKALEVY - JALKAKULMA	21
JALKARENGAS.....	23
VIPUJARRU.....	24
LATAAMINEN YLEENSÄ.....	25
LATURI	25
AKUN SIIJOITTAMINEN	26
EUROVEMA-ELEKTRONIIKKA	27
TEKNISET TIEDOT ELEKTRONIIKKA	27
TEKNISET TIEDOT AKKU.....	27
AKUN VAIHTAMINEN.....	27
LATURIN SIGNAALIT JA VIKAKOODIT	28

TEKNISET TIEDOT LATURI	28
TEKNISET TIEDOT EXL	29
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET	30
TEKNISET TIEDOT ALUSTA	30
LISÄVARUSTELUETTELO.....	31
HÄVITTÄMINEN	32

JOHDANTO

Onnittelumme työtuolivalinnastasi! Toivomme, että olet tyytyväinen tähän Euroveman Euroflex-tuotteeseen, joka on suunniteltu ja valmistettu Gislavedissa Ruotsissa. Työtuoli on rakennettu täyttämään erittäin korkeat ergonomialle, istuinmukavuudelle ja toiminnalle asetetut vaatimukset. Tuolissa on monia säätömahdollisuuksia, joilla se voidaan mukauttaa yksilöllisesti jokaiseen tarpeeseen. Lue käyttöohje huolella, jotta voit hyödyntää tuolin kaikki mahdollisuudet. Eurovema pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen ja sen sisältöön.

YHTEYSTIEDOT

Valmistaja 

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38 SE-332 35 Gislaved Ruotsi

Puh./phone +46 371 390 100

<http://www.eurovema.se>

info@eurovema.se

KÄYTTÄJÄTIEDOT

- Työtuoli luokitellaan 1. luokan lääkinälliseksi laitteeksi.
- Tuote on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua liikkumiseen, toimintojen suorittamiseen istuen ja tukea noustessaan tuolista.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Ei tunnettuja vasta-aiheita.
- Käyttäjän enimmäispaino 270 kg.
- Jos tuoli halutaan sovittaa painavammalle käyttäjälle, ota yhteyttä Eurovemaan
- Odotettu käyttöikä kymmenen vuotta, kun tuotetta käytetään tuotteen käyttöohjeen mukaan.
- Eurovema on kehittänyt ja testannut tuotteen, ja riippumattomat testauslaitokset ovat testanneet sen. Eurovema vastaa siitä, että tuotteen käyttö on turvallista.



Tämä symboli varoittaa tilanteista, jotka voivat olla vaarallisia.



Lue käyttöohje huolellisesti.

HUOLTO JA TAKUU

Jos työtuolia käytetään joka päivä, se tulee toimittaa kerran vuodessa tarkistettavaksi. Tällä pyritään varmistamaan, että työtuolin toiminnot ja turvallisuus säilyvät koko sen käyttöiän. Odotettu käyttöikä on 10 vuotta, kun sitä käytetään ohjeidemme, huoltovälin ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset huoltoa, ota ensisijassa yhteyttä paikalliseen Apuvälinekeskukseen.

Myönnämme tuotteidemme metallirakenteille neljän vuoden takuun, muille osille kahden vuoden takuun poikkeuksena verhoilu, pyörät ja akut, joille myönnämme yhden vuoden takuun, jos mitään muuta ei ole sovittu. Takuu ei kata normaalia kulumista. Suosittelemme, että tuotetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti. Huolto- ja kunnostusohjeet **katso Huolto-ohjeet.**

ASENNUS TOIMITUSHETKELLÄ

- Avaa pakkaus ja tarkista, ettei kuljetusvaurioita ole syntynyt.
- Työtuoli toimitetaan selkänoja ja kyynärnojat irrotettuina!
- Kyynärnojat on varustettu rajoitinruuveilla. Selkänojissa on pääteasennon rajoittimet, jotka on painettava sisään kokoamisen ja purkamisen aikana, jotta ne eivät pääse irtomaan pääteasentoon säädettäessä.
- Asenna kyynärnojat ja selkänoja ja kiristä nuppi.
- Asenna mukana toimitetut ruuvit.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuolin käyttöönottoa.
- Tarkasta tuoli silmämääräisesti päivittäin ennen käyttöä.
- Työtuoli on tarkoitettu käytettäväksi tasaisella alustalla normaalissa sisäilmassa.
- Jos havaitset tuolissa vaurioita tai muutoksia tuolin toiminnassa, ota viipymättä yhteyttä huoltoon (apuvälinekeskukseen).
- Jos tuolia käytetään paljon, se tulee toimittaa säännöllisesti huoltoon tarkastusta varten.
- Kiristä lukitusnuppi ja ruuvit kunnolla säädön jälkeen.
- Tarkkaile, etteivät ruuvit tai osat löysty, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen. Ota silloin välittömästi yhteyttä huoltoon.
- Huollon ja kunnossapidon saa suorittaa vain Euroveman valtuuttama henkilökunta.
- Ainoastaan alkuperäisiä Euroveman osia saa käyttää.
- Tuolia ei saa varustaa muilla kuin Euroveman hyväksymillä lisävarusteilla tai osilla.
- Älä ylitä käyttäjän enimmäispainoa.
- Tarkista, että rajoitinruuvit on asennettu kyynärnojiin ja rajoitinkuula selkänojan kiinnikkeeseen, jotta ne eivät pääse irtomaan pääteasentoon säädettäessä.
- Käyttäjä saa käyttää toimintoja, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käyttäjä ei saa käyttää toimintoja, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.
- Käyttäjä ei saa missään tapauksessa istua tuolissa huollon aikana, paitsi kyynärnojien ja jalkatukien vaihdon yhteydessä, jos voidaan varmistaa, että käyttäjä ei putoa tuolista.

SYMBOLIEN SELITYKSET

 Varoitus	 Lue käyttöohje
 Varoitus puristumisvaara	 Istuimen kallistus
 Ei saa silittää	 Selkänojan kulma
 Ei kestä vahvempia kemiallisia nesteitä kuin perkloorietyleeni	 Selkänojan korkeus
 Kloorivalkaisuaineita ei saa käyttää	 Istuimen syvyys
 Ei rumpukuivausta	 Käsinojan korkeus
 Konepesu 60°	 Ohjauspainikkeen sähkötoiminto
 Suojattava kosteudelta	 Latausliitäntä
 Käsiteltävä varovasti	 Tulo-ohjaus
 Tämä puoli ylöspäin	 Käyttäjän paino + lisävarusteet
 Sallittu lämpötila	 Soveltuva osa tyyppi B
 Sallittu suhteellinen kosteus	Suojaa halkaisijaltaan yli 12,5 mm:n suuria vieraita esineitä ja pystysuoraan putoavia vesipisaroita vastaan.
 Sallittu korkeus merenpinnan yläpuolella	INTERMITTENS 2 / 18 MIN DUT CYCLE Käyttöjakso
 Valmistuspäivä	
 Valmistaja	
 Vain sisäkäyttöön	
 Käyttäjän enimmäispaino	
 Sarjanumero	
 CE-merkintä osoittaa, että tuote on eurooppalaisten säännösten mukainen	
 Sähkökomponentit toimitettava erityiskierrätykseen	
 Tuote on osa kierrätysjärjestelmää	
 Komponentin paino ylittää 10 kg	

VAROITUS



Tuote, jonka suorituskyky on heikentynyt tai muuttunut, on poistettava käytöstä välittömästi. Ota silloin välittömästi yhteyttä huoltoon (apuvälinekeskukseen) tai Eurovema Mobility AB:hen. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin valtuutettu teknikko on tarkastanut tuotteen.



Tuotetta ei saa kuormittaa suuremmalla painolla kuin määritetty käyttäjän enimmäispaino, koska tämä voi aiheuttaa komponenttien vaurioitumisen ja johtaa onnettomuuksiin.



Varmista, että tuotteen seisontajarru on aktivoitu, kun istut ja nouset ylös, sillä on olemassa vaara, että tuote vierii tahattomasti pois ja aiheuttaa kaatumisen.



Tuotteeseen saa tehdä muutoksia vain valtuutettu teknikko yhteisymmärryksessä tuotteen määrääjän kanssa. Jos tarvitaan yksilöllistä mukauttamista, ota yhteyttä apuvälinekeskukseen tai Eurovema Mobility AB:hen. Jos tuotetta muutetaan, CE-merkintä ei ole enää voimassa eikä Eurovema ota enää vastuuta tuotteesta. Valtuutetun teknikon Euroveman suostumuksella tekemät muutokset voivat johtaa CE-merkinnän säilyttämiseen.



Vain Eurovema Mobility AB:n valtuuttama henkilöstö saa tehdä korjauksia huoltaa tuotteen, jotta CE-merkintä säilyy. Tuolin käyttäjä ei saa tehdä korjauksia tai teknistä huoltoa. Lisätietoa huollosta ja kunnossapidosta löydät huolto-ohjeesta.



Tuote on tarkoitettu sen henkilön käyttöön ja siihen tarkoitukseen, johon se on määrätty, tuote on säädetty tätä henkilöä varten, eikä näitä asetuksia saa muuttaa kukaan muu kuin tuotteen määrännyt henkilö. Jos toinen käyttäjä ottaa sen haltuunsa, on suoritettava uudet testaukset.



Sähköisellä istuimen nostolla varustetulla tuotteella voidaan joissakin tapauksissa saavuttaa istuinkorkeus, joka on korkeampi kuin käyttäjän jalkojen ulottuvuus lattiaan, mikä voi aiheuttaa putoamisvaaran, jos käyttäjä nousee ylös tästä asennosta. Varmista, että lähellä on henkilökuntaa tai toinen henkilö, jos käytetään suurinta nostokorkeutta.



Tuotteen komponentit ja osat on asennettava asennusohjeiden mukaan, jotta ne eivät pääse irtoamaan. Kaikki kaapelit on kiinnitettävä nippusiteillä.



Tuotteeseen ei saa asentaa muita kuin Eurovema Mobility AB:n CE-merkinnässä hyväksyttyjä komponentteja tai lisävarusteita.



Tuotteen ohjausjärjestelmään saa liittää vain tuotteeseen tarkoitettuja sähkökomponentteja. Komponenttien liittämisen ohjausjärjestelmään saa suorittaa vain valtuutettu teknikko.



Vain tuotteeseen tarkoitettuja Eurovema Mobility AB:n toimittamia latureita ja akkuja saa käyttää, jotta CE-merkintä ja takuu pysyvät voimassa.



Matkapuhelimet tai muut RF-viestintälaitteet voivat häiritä tuotetta, jossa on sähköisiä toimintoja.



Tuotteessa on monia pieniä osia ja ruuveja, jotka irrotessaan voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille ja lemmikkieläimille.



Joissakin kokoonpanoissa tuote on varustettu kaapeleilla ja johdoilla, joita ei voida täysin kiinnittää niiden toiminnan vuoksi, mikä voi aiheuttaa kuristumisvaaran pienille lapsille.



Sähköjarrulla varustetuissa tuotteissa on tärkeää, että akku ei ole täysin tyhjä, jolloin sähköjarru ei toimi. Jos tuote on jarruttomassa tilassa, on vaarana tuotteen tahaton vieriminen pois aiheuttaen kaatumisen., kun istuudut tai nouset ylös.



Tuotteen metallipinnat voivat kuumentua, jos ne altistuvat suoralle auringonpaisteelle, ja jos iho joutuu kosketuksiin niiden kanssa, voi syntyä palovammoja. Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle pitkiksi ajoiksi.



Sähköisiä toimintoja käytettäessä on lapsilla ja lemmikkieläimillä puristumisvaara. Varmista aina, ettei kukaan muu kuin käyttäjä ole tuotteen välittömässä läheisyydessä, kun sähköisiä toimintoja käytetään.

ONNETTOMUUKSISTA TAI VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN

Lääkinnällisten laitteiden valmistajat ovat EU:ssa velvollisia valvomaan järjestelmällisesti tuotteidensa toimintaa käytännön käytössä.

CE-merkintää ovat edeltäneet riskianalyysit ja testit. Toimenpiteet on toteutettu tunnistettujen riskien minimoimiseksi niin pitkälle kuin mahdollista. Jos onnettomuuksia ja vaaratilanteita kuitenkin tästä huolimatta tapahtuu, niistä on ilmoitettava Eurovema Mobility AB:lle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

PUHDISTUS

Työtuolin pinnat pyyhitään hieman kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella, kuten esimerkiksi astianpesuaineella. Aseta työtuoli niin, että se seisoo tukevasti ja jarruta sitä. Istuimen verhoilu voidaan puhdistaa myynnissä olevilla verhoilun puhdistamiseen tarkoitetuilla aineilla.



Huomaa, että puhdistus tulee tehdä avoimella pinnalla, ei avotulen lähellä.


SÄILYTYS

Työtuoli on säilytettävä kuivassa ja viileässä ympäristössä. Vältä tuolin altistamista kuumuudelle, kylmälle tai suoralle auringonpaisteelle. Metallipinnat voivat kuumentua voimakkaasti, jos ne altistuvat auringonpaisteelle. Kylmällä ilmalla tuolin tulee lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Älä altista tuolia myöskään vedelle, muille nesteille tai kemikaaleille.

PÄÄETIKETTI


Tuotteen etiketissä on tärkeitä tietoja.

- 1) Tuotteen nimi
- 2) Tuotenumero
- 3) Sarjanumero UDI-PI
- 4) Viivakoodi
- 5) Käyttäjän enimmäispaino
- 6) Lääkinnällinen laite
- 7) CE-merkintä
- 8) Lue käyttöopas ennen käyttöä
- 9) Valmistuspäivä
- 10) Valmistajan nimi

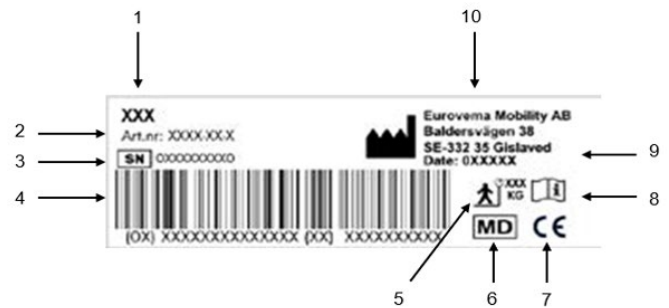

TOISSIJAINEN ETIKETTI

- 1) Soveltuva osa tyyppi B
- 2) Ajoittainen toiminto 2/18 min
- 3) Sallittu huoneenlämpötila
- 4) Sallittu suhteellinen ilmankosteus
- 5) Vain sisäkäyttöön
- 6) Sallittu korkeus merenpinnan yläpuolella
- 7) Turvallinen kuormitus 285 kg
- 8) Lue käyttöopas ennen käyttöä
- 9) IP21-luokka.

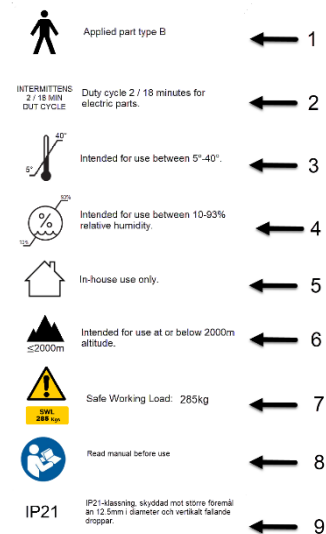

CE-MERKINTÄ

Tuote on CE-merkitty Euroopan parlamentin lääkitieteellisiä laitteita koskevan asetuksen MDR 2017/745 mukaisesti. CE-merkki on tyyppikilvessä. Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset.

EN1335-2:2018 Työtuolien turvallisuusvaatimukset

EN 60601-1:2006 Sähkökäyttöiset lääkitieteelliset laitteet – osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskvyyllle.

60601-1-2:2014 Sähkökäyttöiset lääkitieteelliset laitteet – turvallisuus – osa 1–2 Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskvyyllle – Sähkömagneettisia häiriöitä koskeva täydentävä standardi.


SS-EN 1021-2:2014 Huonekalut – Pehmustettujen huonekalujen syttyvyyden arviointi – osa 2: Sytytyslähde: Kaasuliekki, joka vastaa palavaa tulitikkua.

SS-EN 1021-1:2014 Huonekalut – Pehmustettujen huonekalujen syttyvyyden arviointi – osa 1: Sytytyslähde: Kytevä savuke.

SS-EN ISO 21856:2022 Apuvälineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Riskinhallinnan soveltaminen lääkitieteellisiin laitteisiin.


MERKINNÄT TUOTTEESSA

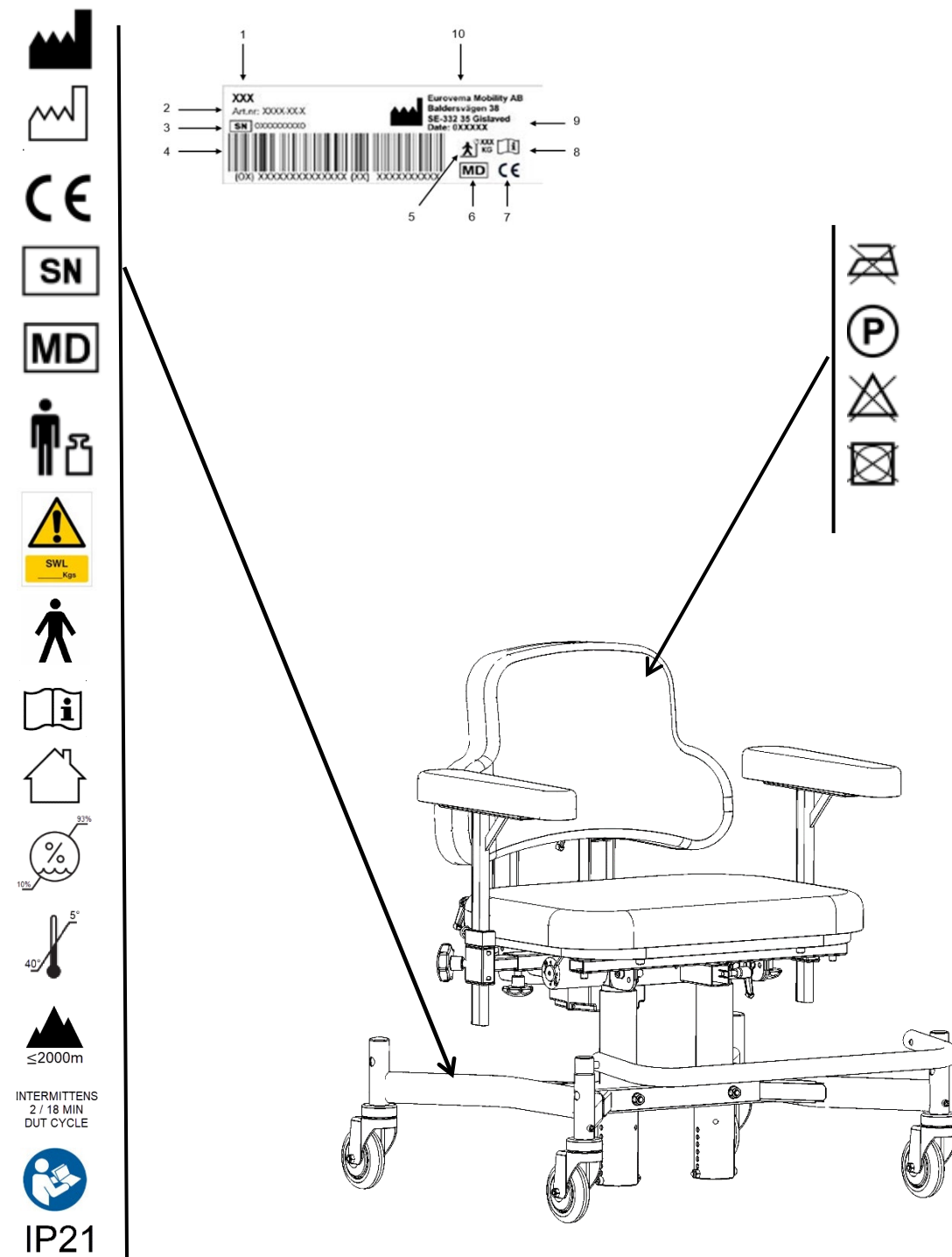

Puristusvaarat ilmoitetaan kunkin toiminnon ohjeiden yhteydessä, jos siihen voi liittyä puristusvaara. Tuolissa on merkinnät kohdissa, joissa on puristusvaara.

TUOLIN EXL YLEISKATSAUS

1. Selkänoja
2. Käsinoja
3. Istuin
4. Kaasujousi tai sähkökäyttöinen nostopylväs
5. Jalkarengas
6. Jarruvipu
7. Takapyörät
8. Etupyörät

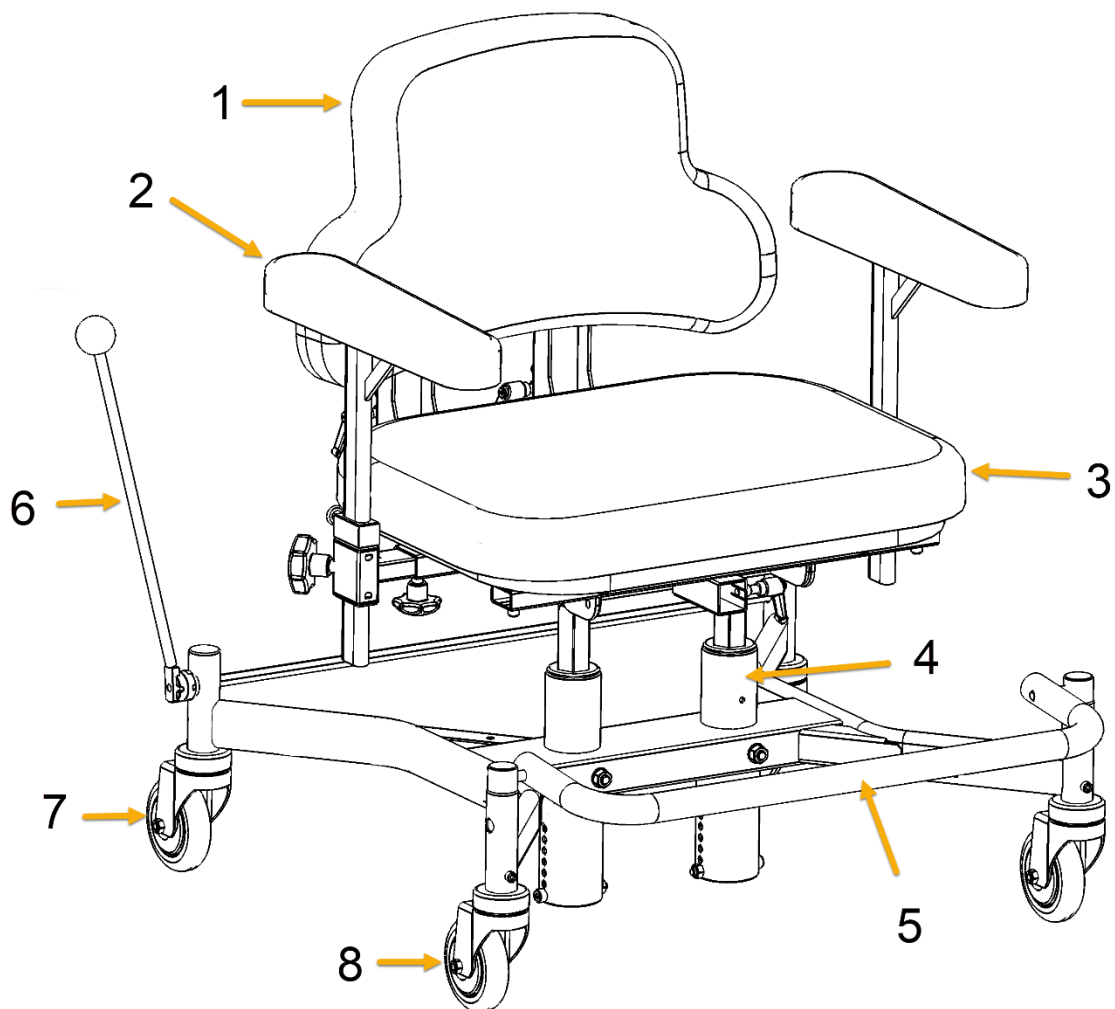

SELKÄNOJAN KORKEUS


Multirygg-selkänöjan ansiosta selkänöjan korkeutta voidaan säätää sekä vivun että säätöruuvien avulla.

Molemmat tolpot voidaan säätää samanaikaisesti.

1. Löysää vipua 1/2 kierrosta kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Aseta haluttu selkänöjan korkeus.
3. Lukitse vipu kiertämällä sitä myötäpäivään 1/2 kierrosta.
4. Voit säätää lisää korkeutta löysäämällä säätöruuvia muutama kierros.
5. Aseta haluttu selkänöjan korkeus.
6. Lukitse säätöruuvi.



Säätäminen voi aiheuttaa puristumisvaaran

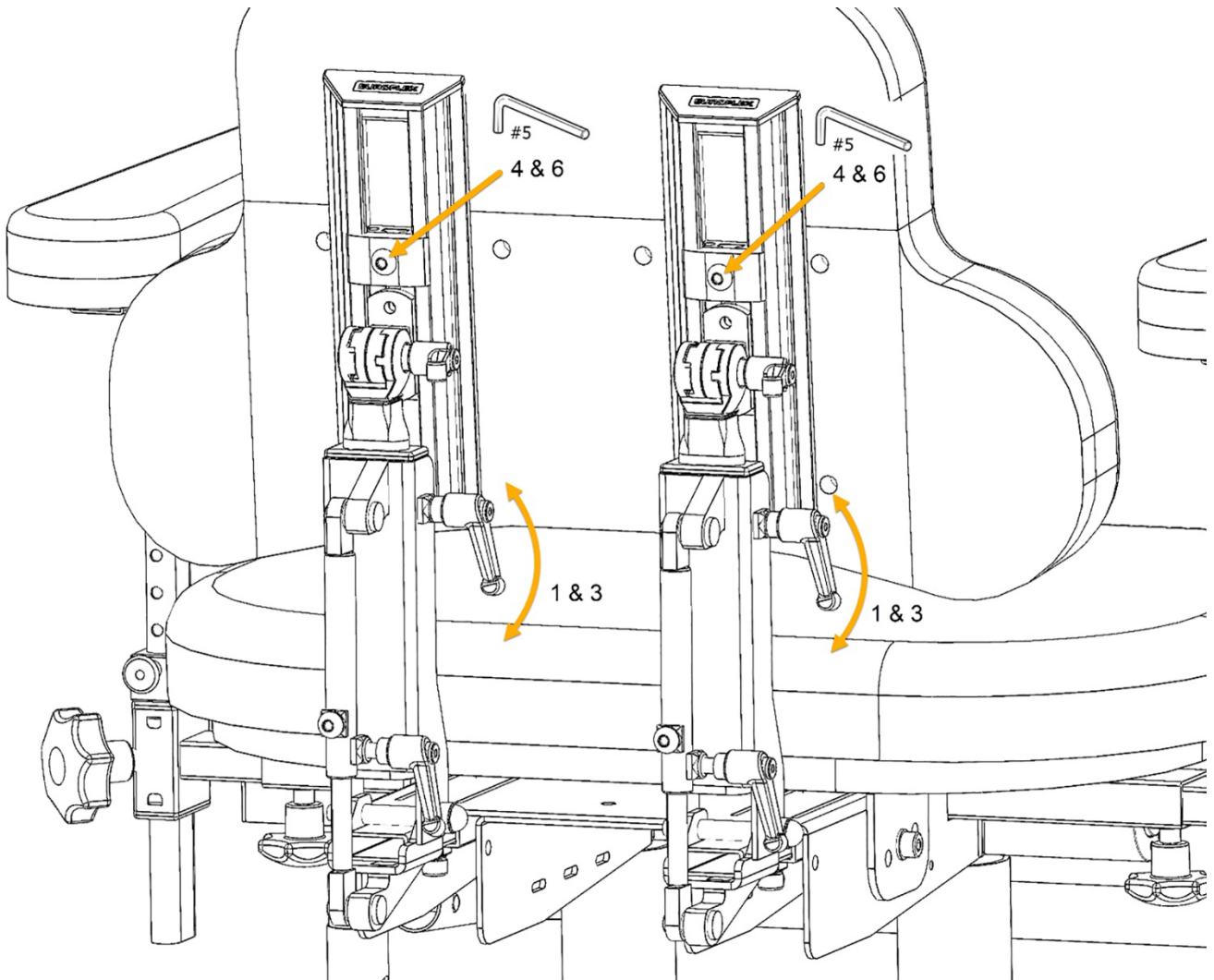


SELKÄNOJA – SELKÄTYYNYN KALLISTUS

Multirygg-selkänojan ansiosta selkänojan tyynyn kallistusta voidaan säätää ja asettaa kahdella tavalla.

- 1) Löysää lukitusruuvi ja vipu, jolloin koko selkänojamekanismia voi kallistaa ja asettaa eteenpäin tai taaksepäin.
- 2) Aseta haluttu selkänojan kulma.
- 3) Lukitse lukitusruuvi ja vipu.
- 4) Löysää vipu kiertämällä sitä vastapäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta.
- 5) Aseta haluttu kulma itse selkänojan tyynyyn.
- 6) Lukitse vipu kiertämällä sitä myötäpäivään $\frac{1}{2}$ kierrosta



Säätäminen voi aiheuttaa puristumisvaaran

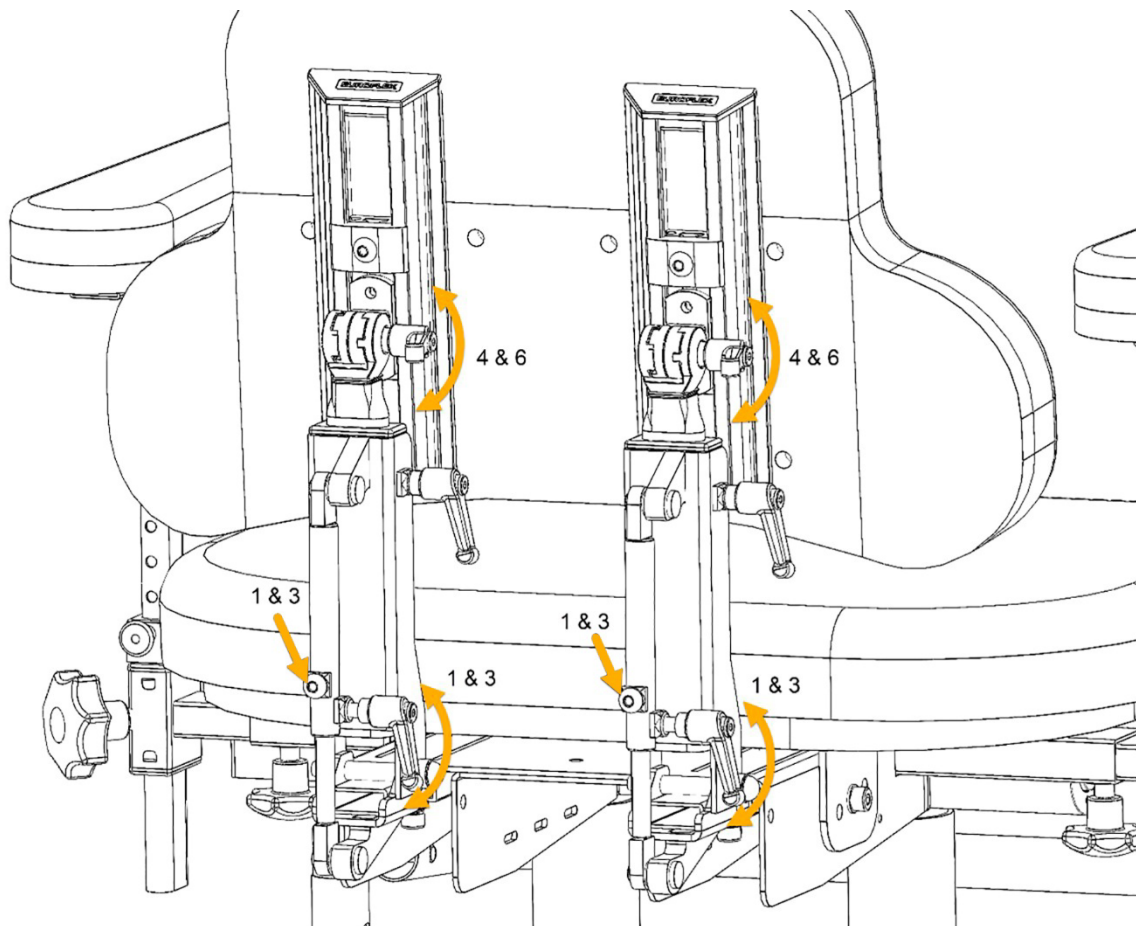



SELKÄNOJA – ISTUINSYVYYS

Istuinsyvyys säädetään selkänojan avulla. Sääda haluttu syvyys siirtämällä selkänojaa eteenpäin tai taaksepäin. Hienosäätö voidaan tehdä myös selkänojan kulmaa säätämällä. Molemmat tolpat täytyy säätää samanaikaisesti.

- 1) Löysää molemmat ruuvit takareunasta istuimen alta.
- 2) Työnnä selkänojamekanismeja eteen tai taakse haluamaasi asentoon.
- 3) Kiristä molemmat lukitusruuvit alta.
- 4) Istuinsyvyyden hienosäätöä varten löysää lukitusruuvia ja selkänojan kallistuksen vipua.
- 5) Kallista selkänojaa eteen- tai taaksepäin.
- 6) Sääda sen jälkeen selkänojan tyynyn kallistus-vivun avulla.
- 7) Kiristä selkänojan kallistuksen vipu ja lukitusruuvi



Säätäminen voi aiheuttaa puristumisvaaran

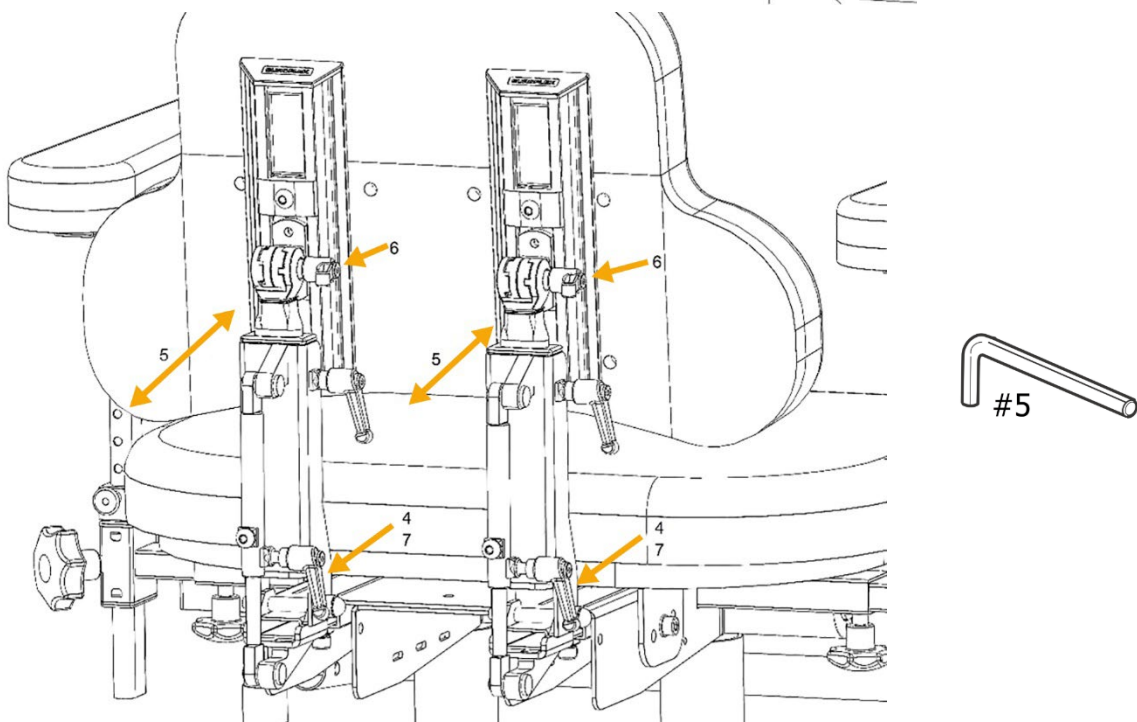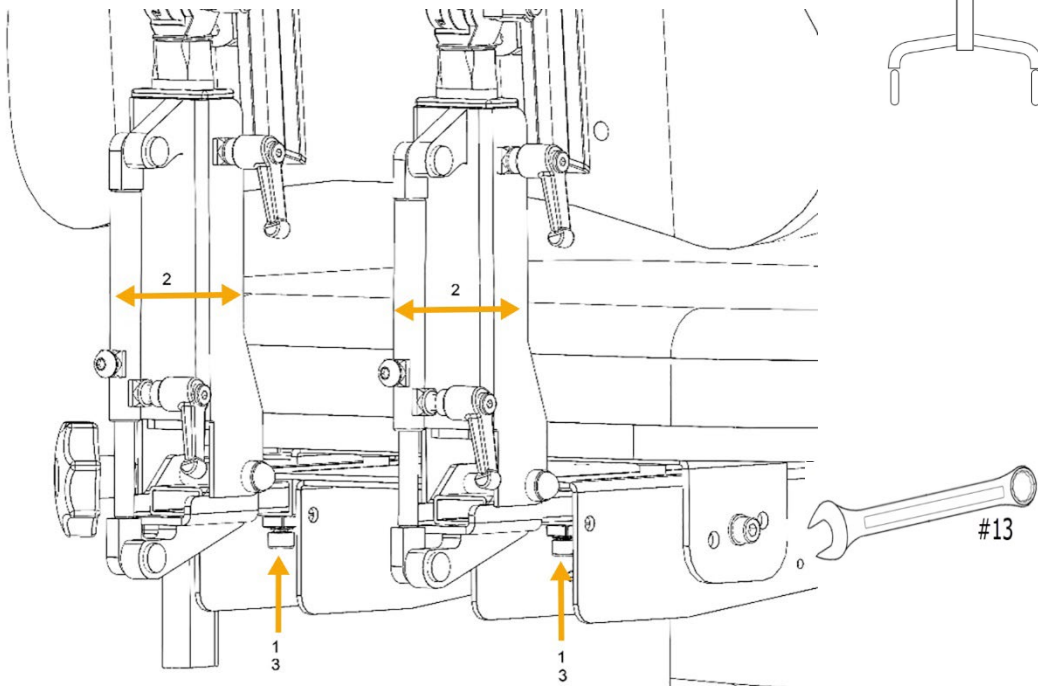

ISTUIMEN KALLISTUS


Kulmaa voidaan säätää manuaalisesti työkalulla. Ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon istuinkulman säätämiseksi. Istuimen kulmaa voidaan säätää 3° eteenpäin tai 3° taaksepäin, mikä tehdään löysäämällä 4 pulttia istuimen alapuolelta.

- 1) Jos haluat kallistaa istuinta eteenpäin, löysää istuimen takaosan alapuolella olevan kiinnikkeen vasemmalla tai oikealla puolella olevia pultteja, katso kuva (1). Valitse jokin rei'istä. Reikä (3) antaa suurimman kulman eteenpäin. Kiristä pultit.
- 2) Jos haluat kallistaa istuinta taaksepäin, löysää istuimen etuosan alapuolella olevan kiinnikkeen vasemmalla tai oikealla puolella olevia pultteja, katso kuva (2). Valitse jokin rei'istä. Reikä (3) antaa suurimman kulman taaksepäin. Kiristä pultit.


Työkalu: kuusiokoloavain 6 mm, kiintoavain 13 mm.



Varmista, ettei kukaan jää puristuksiin, kun istuinta kallistetaan.

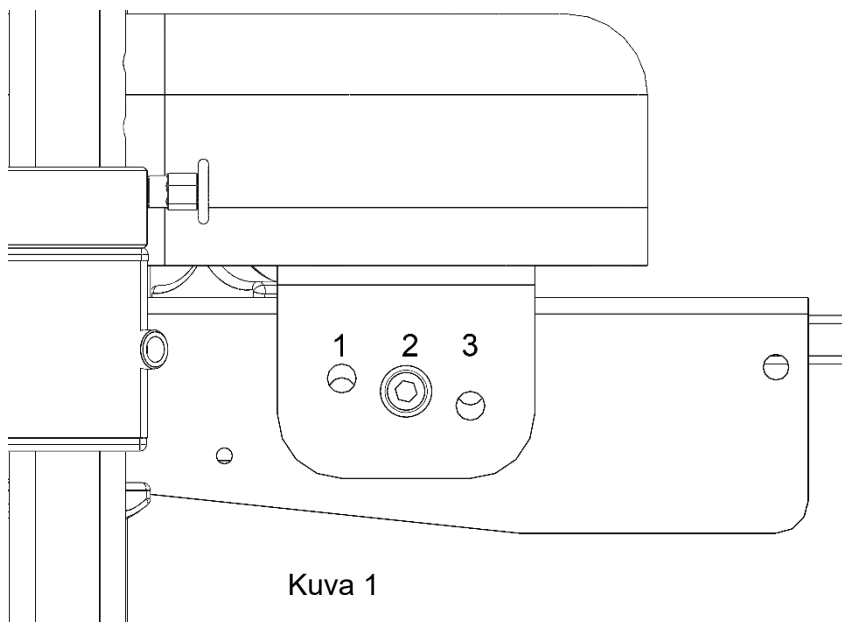

Kuva 1

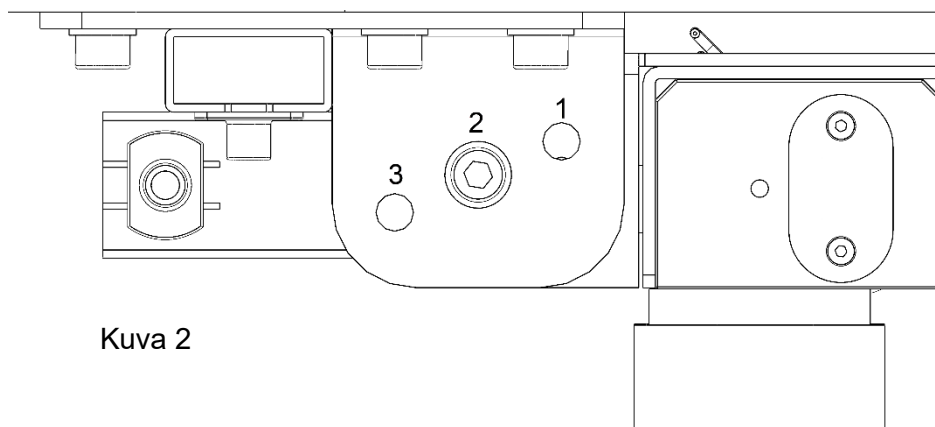

Kuva 2

KYYNÄRNOJAT – ASETUKSET

KYYNÄRNOJAN KORKEUSSÄÄTÖ



- 1) Löysää nuppia (1) muutama kierros.
- 2) Siirrä sitten turvalukko (2) vetämällä nuppi suoraan ulos, haluttuun asentoon poratuissa rei'issä, jotta saat halutun korkeuden.
- 3) Kiristä nuppi/ruuvi.

KYYNÄRNOJAN LEVEYSSÄÄTÖ

- 1) Löysää nuppia (3) muutama kierros ja säädä haluttu leveys.
- 2) Kiristä nuppi.



Säätäminen voi aiheuttaa puristumisvaaran

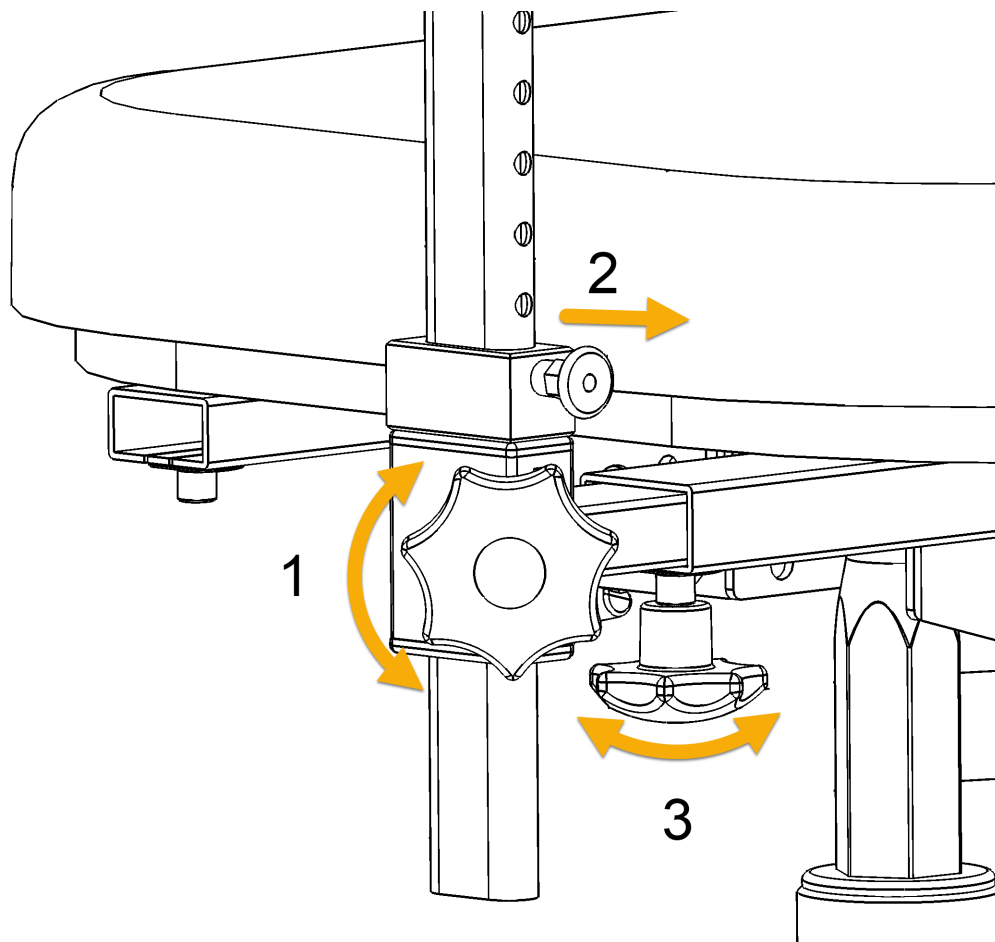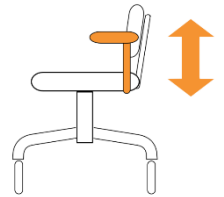

ISTUINKORKEUS





Ole varovainen laskiessasi, jotta kukaan eikä mikään jää puristuksiin istuinta nostettaessa. Tuolin ollessa pöydän tai levyn alla tai kädet ja jalat voivat jäädä puristuksiin.

Euroflex EXL:n istuinkorkeutta säädetään sähköisellä nostolaitteella tai manuaalisesti kaasujousella. Sähköistä nostolaitetta ohjataan ohjausrasialla, joka on asennettu toisen kyynärnojan etureunaan. Istuinkorkeus on vakiona 36–52 cm (lyhyt nostopylväs) tai 44–68 cm (pitkä nostopylväs). (Vastaa 160 mm vaihtoehtoisesti 240 mm iskunpituutta). Istuinkorkeus voidaan säätää korkeammaksi 75 cm:iin säätämällä istuimen sähkönostinta 7 asennon välillä, katso kuva alla.

Kaasutoiminen istuinkorkeuden säätö on 40–55 cm matalassa mallissa ja 46–66 cm korkeassa mallissa. (Vastaa 150 mm ja 200 mm iskunpituutta). Jos haluat korkeamman istuinkorkeuden 74 cm:iin asti, säädä kaasujousen asentoa noudattamalla alla olevia vaiheen 8 ohjeita.

HUOM! Korkeimman istuinkorkeuden valinta vaikuttaa myös matalimpaan istuinkorkeuteen (katso kuva alla).

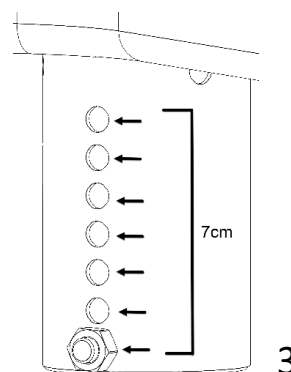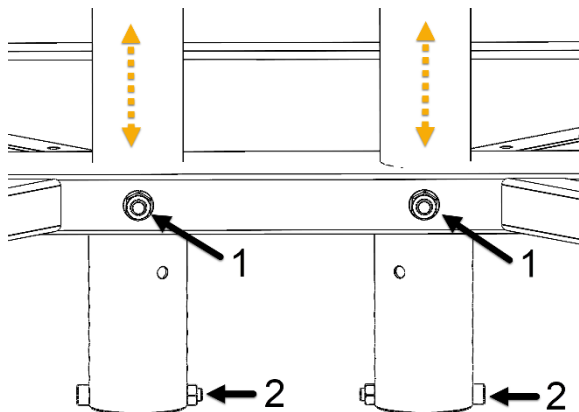


KORKEUDEN LISÄSÄÄDÖT

- 1) Ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon istuinkorkeuden säätämiseksi manuaalisesti.
- 2) Löysää mutterit (1), katso kuva.
- 3) Vapauta säätöreiät nostamalla koko istuinyksikköä ylöspäin, katso kuvaa 3.
- 4) Kiristä mutterit (1) väliaikaisesti.
- 5) Irrota ruuvit (2) ja ruuvaa ne takaisin haluamaasi reikään.
- 6) Löysää mutterit (1) ja laske istuinyksikkö alas ruuvien (2) varaan.
- 7) Kiristä mutterit (1).


SÄHKÖINEN ISTUIMEN NOSTO

- 1) Ylöspäin: Vedä istuimen nostoon kytketyn keinukyttimeen etuosa ylös. Istuinkorkeus nousee.
- 2) Alaspäin: Paina istuimen nostoon kytketyn keinukyttimeen etuosa alas. Istuinkorkeus laskee.

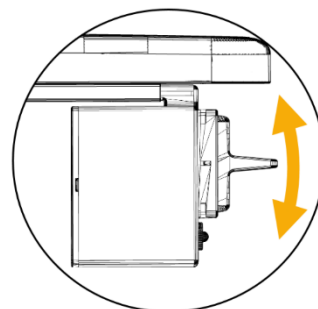

MANUAALINEN ISTUIMEN NOSTO


Istuinkorkeutta voidaan laskea tai nostaa viemällä istuimen sivussa oleva vipu taaksepäin/ylöspäin kaasujousien vapauttamiseksi.

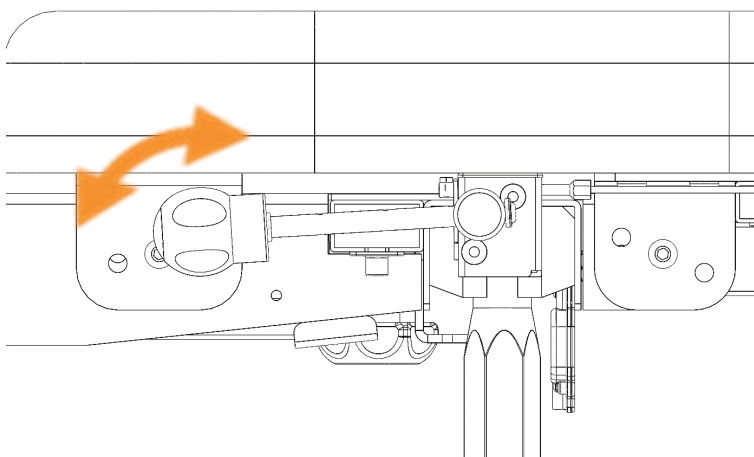

JALKALEVY

Jalkalevyn asetukset

- 1) Jalan kulma
- 2) Korkeus
- 3) Jalkalevyn kulma

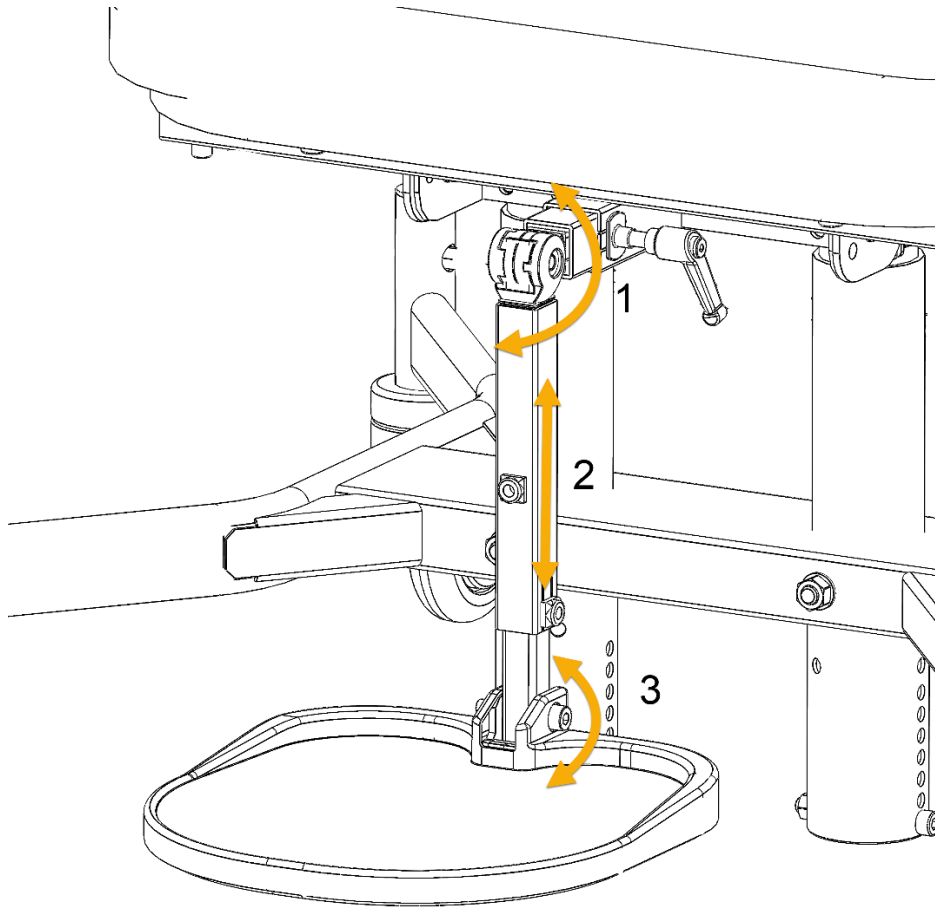


Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin

(3) JALKALEVYN KULMA

Jalkalevy on säädettävissä vaakatasossa. Jos haluat kallistaa sitä alaspäin, käännä kahta ruuvia kuusiokoloavaimella nro 5 vastapäivään, kunnes haluttu kulma on saavutettu ja lukitse ruuvit muttereilla. Jos haluat kallistaa ylöspäin, löysää mutterit ja kierrä ruuveja myötäpäivään,



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin

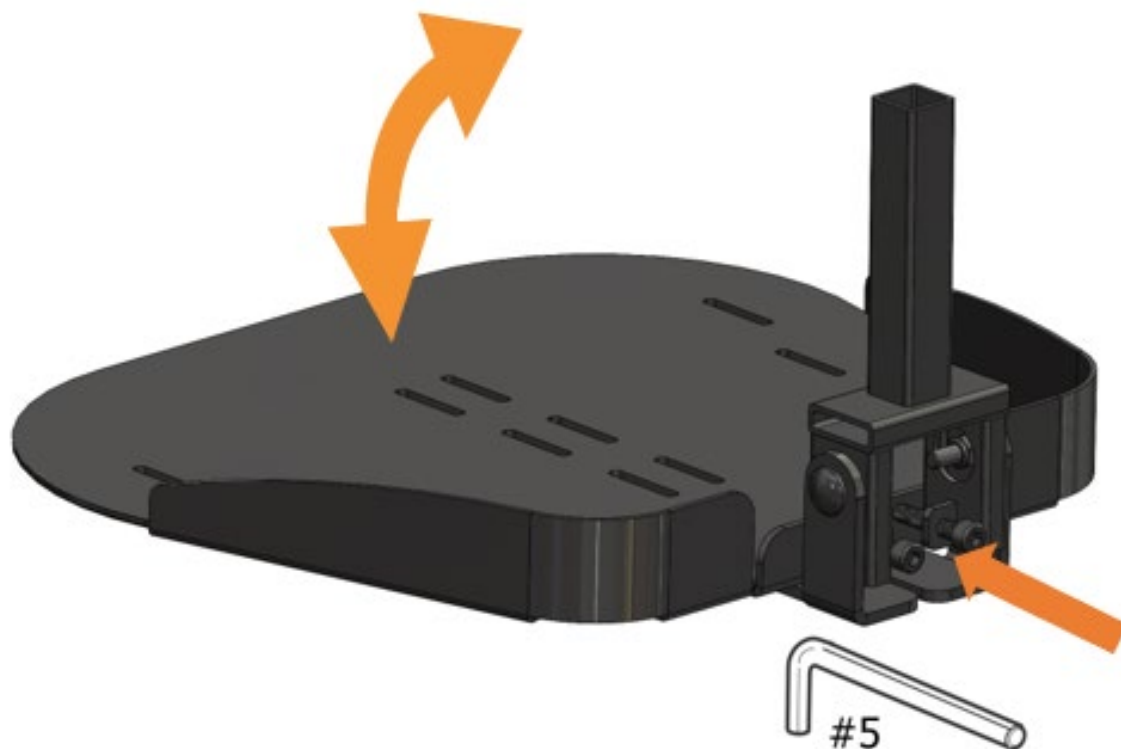


JAETTU JALKATUKI

- 1) Löysää lukitusruuvi **1** kokonaan ja ruuvia **2** muutama kierros, jotta jalkalevyä pystyy nostamaan tai laskemaan.
- 2) Kun haluttu korkeus on saavutettu, kiristä ruuvit **1** ja **2**.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin

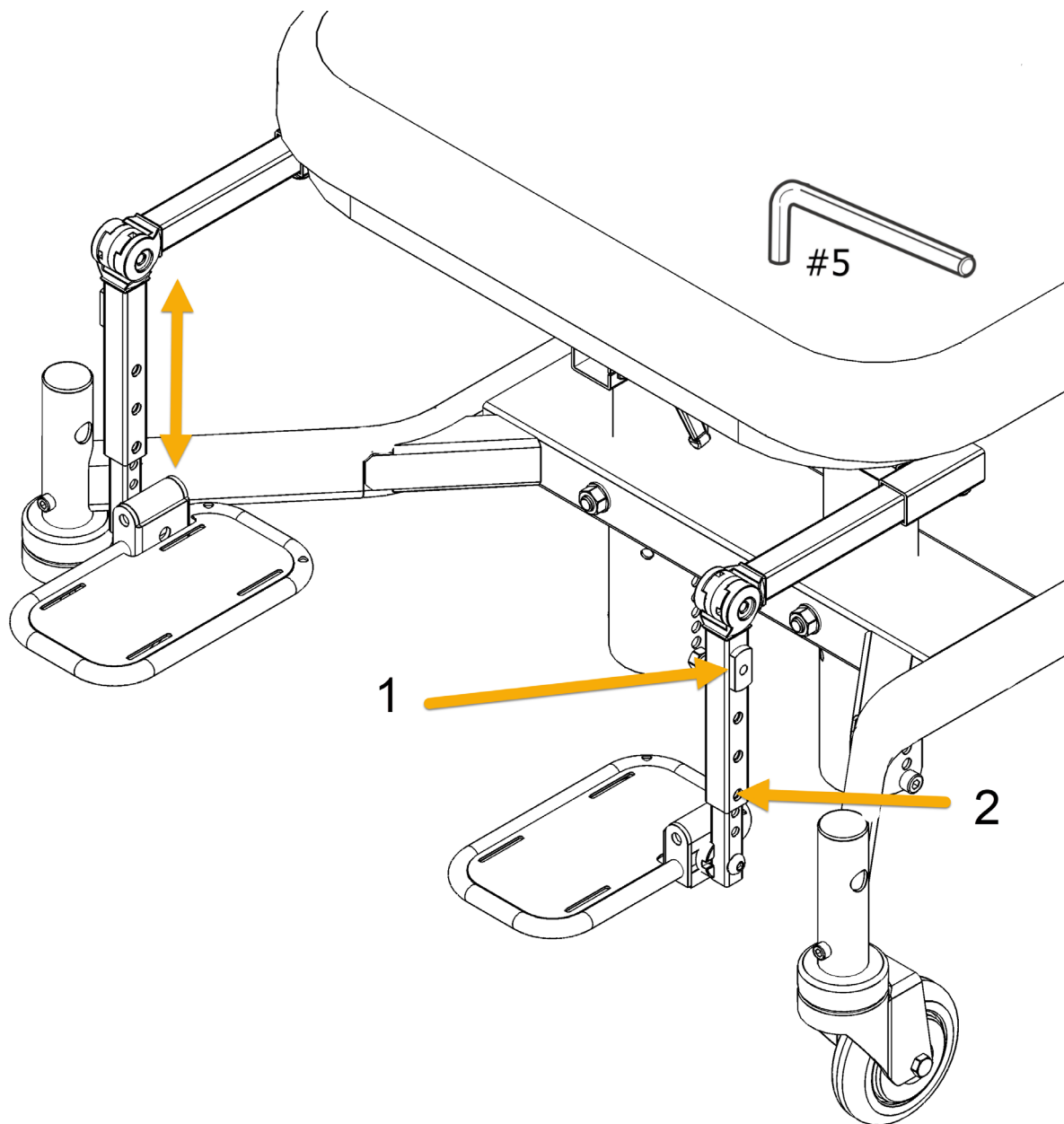


JAETTU JALKALEVY – JALKAKULMA

Jalkalevyn kulma on säädettävissä, jotta löydät mukavan kulman jaloille. Löysää ruuvia kuusiokoloavaimella nro 5 muutamia kierroksia ja säädä kulma **1**. Kiristä ruuvi.

Jalkalevy voidaan taittaa ylös ilman työkaluja **2** istuutumisen ja nousemisen helpottamiseksi.



Älä seiso jalkalevyn päällä, tuoli kaatuu eteenpäin

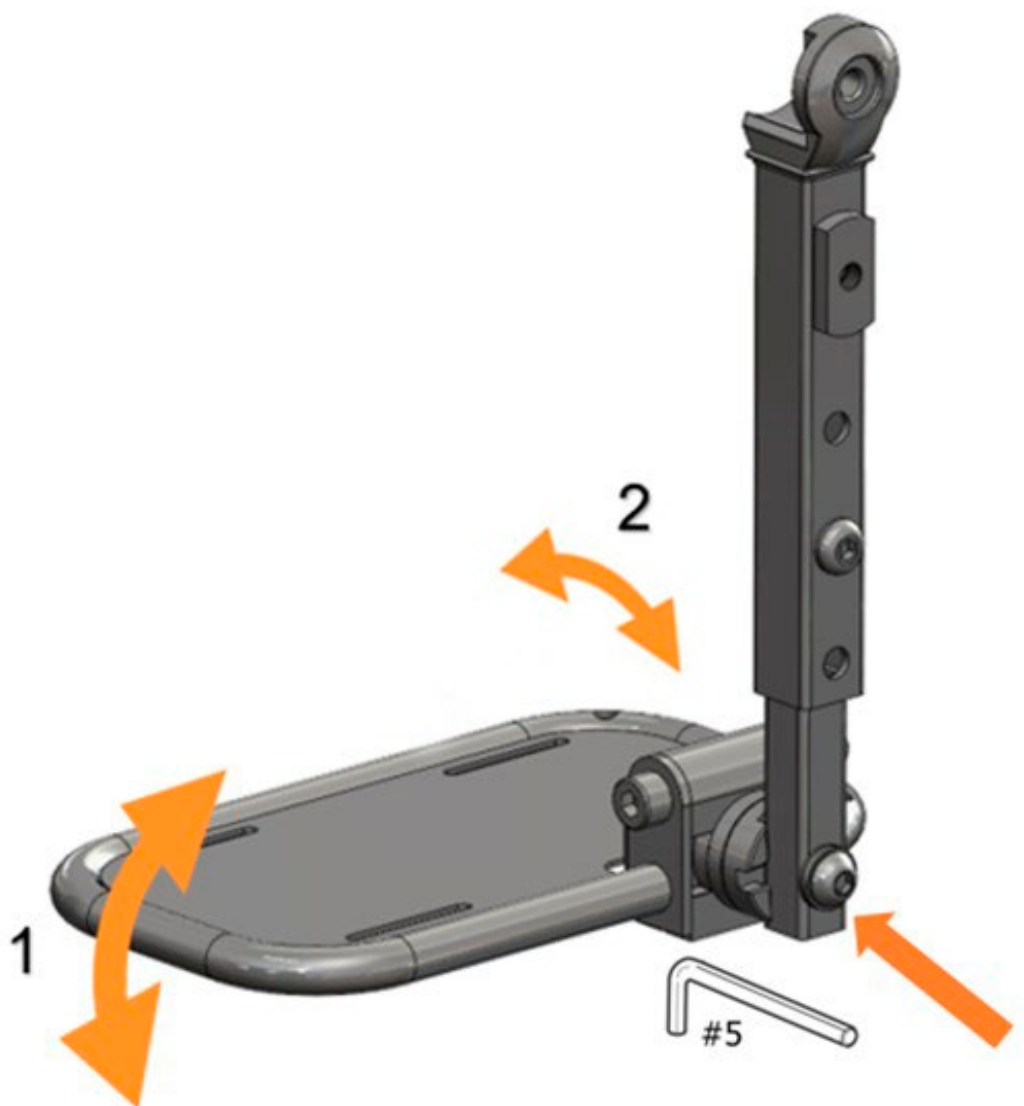


JALKARENGAS

Jalkarengas on asennettu alustan etupuolelle alustan yläreunaan. Jalkarengas voidaan taittaa ylös siirtymisen ja istuutumisen ja nousemisen helpottamiseksi.



Taita jalkarengas alle, ennen kuin nouset tuolista kaatumisen välttämiseksi.

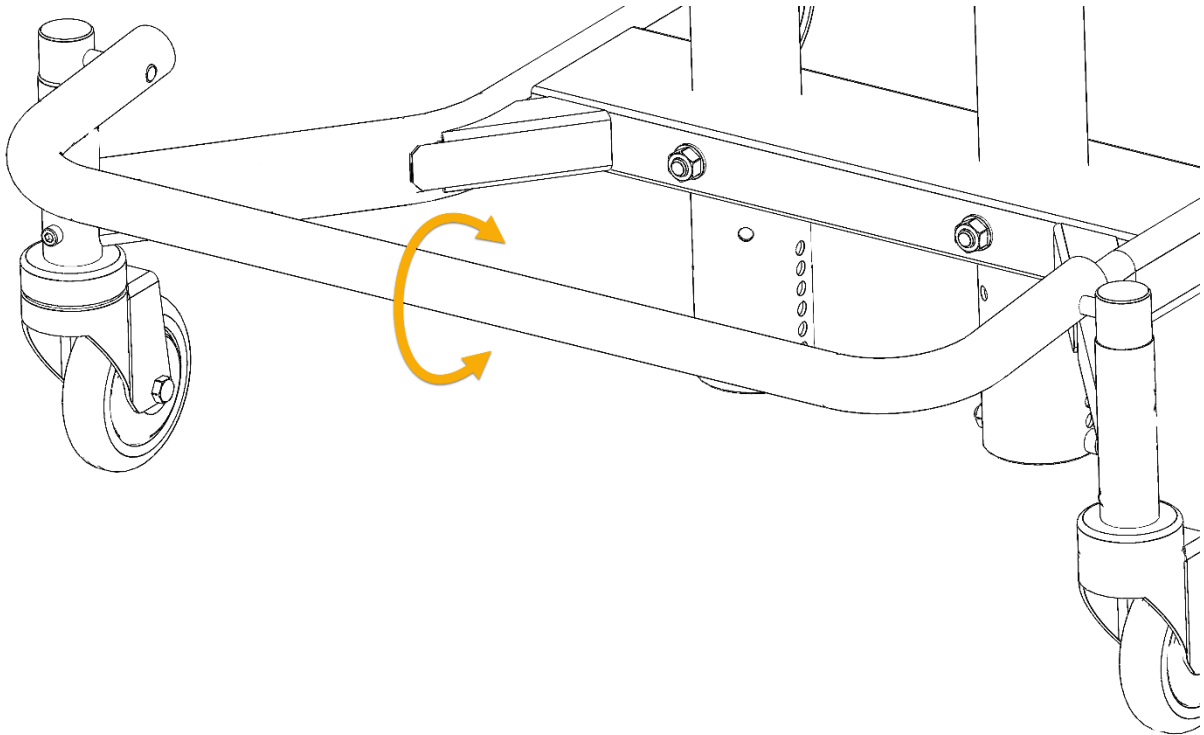


VIPUJARRU

Vipujarru

Jarruta tuolia siirtämällä jarruvipua eteenpäin. Vapauta jarru siirtämällä vipua taaksepäin uudelleen.



Laita jarru aina päälle ennen kuin istuudut tuoliin tai nouset tuolista.

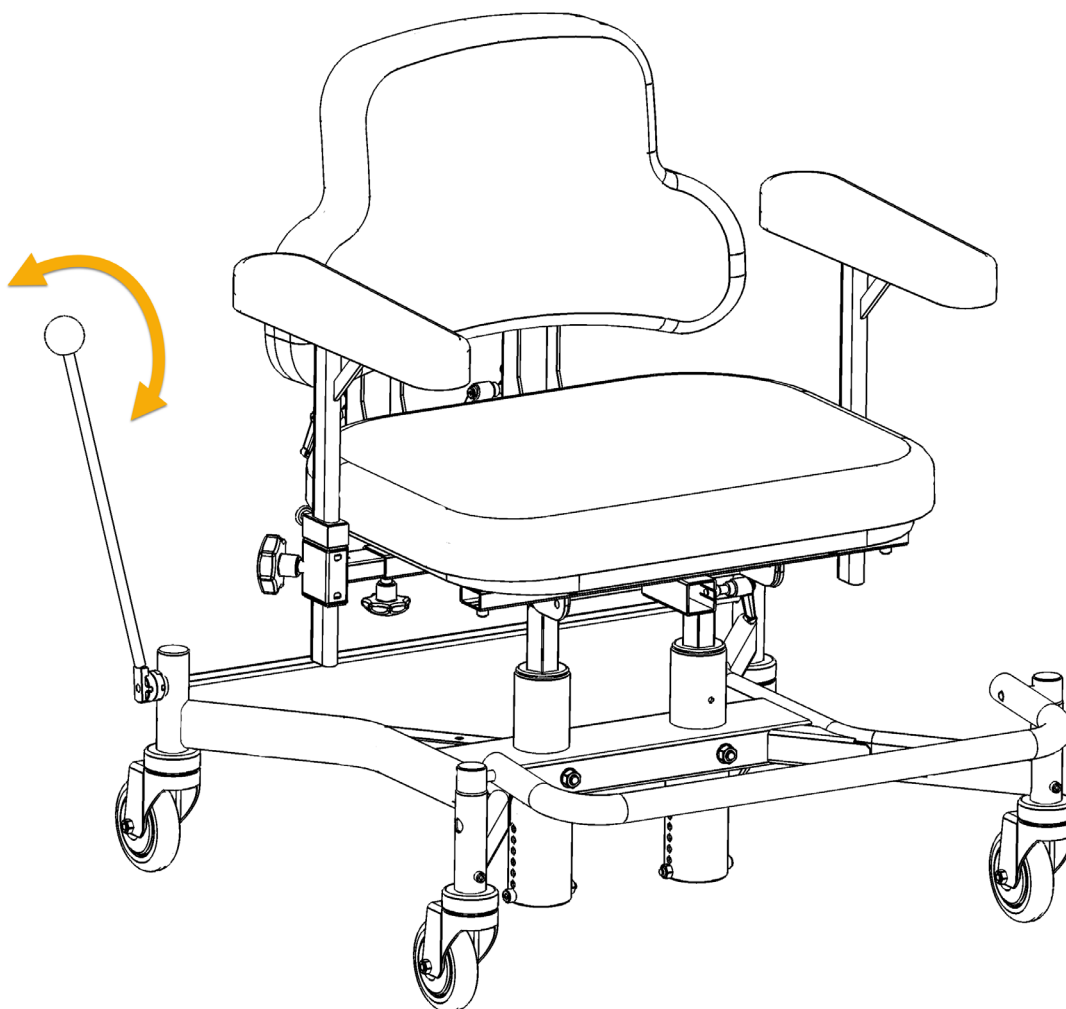

LATAAMINEN YLEENSÄ

Jotta akut säilyttäisivät täyden suorituskykynsä mahdollisimman kauan, on tärkeää, että akut ladataan säännöllisesti. Yleensä riittää, että lataat 1–2 kertaa viikossa, mieluiten päivällä, jolloin tuolia ei käytetä. Älä lopeta latausta ennen kuin se on valmis. Lataus on valmis, kun akun LED-valo palaa vihreänä. Pitkäaikaisessa varastoinnissa akku on ladattava noin kerran neljässä viikossa. Sijoita tuoli latauksen aikana niin, että latauspistoke voidaan helposti asettaa ja irrottaa. Sähkötoiminnot toimivat niin pitkään, kun akussa on latausta. Lataa ennen ensimmäistä käyttöä.



Älä jätä latausta päälle pitkiksi ajoiksi keskeytyksettä. Älä myöskään jätä laturia kiinni pistorasiaan latauksen päätyttyä. Älä jätä latauspistoketta tuolin latausliitäntään latauksen päätyttyä.




Akun säännöllinen lataaminen on erityisen tärkeää sähkötoiminnoilla varustetuissa tuoleissa, jotta voit varmistaa, että voit lukita sähköjarrun ja säätää istuinasentoa ja nousta tuolista ja istuutua tuoliin turvallisesti.


LATURI

Akku on ladattava, kun akku antaa äänimerkin ja akun LED vilkkuu vihreänä. Jos LED vilkkuu oranssina, akku on ladattava kiireellisesti ennen kuin se sammuttaa tuolin toiminnot akun suojaamiseksi.

- 1) LED-valo (3) syttyy, kun käytössä oleva tuoli tarvitsee latausta. Kun LED (3) palaa tasaisesti ilman, että mitään sähköistä toimintoa käytetään, lataa tuoli välittömästi.
- 2) Kytke latausliitin (2) tuolin liitäntään (1). Led (4) laturin etupuolella palaa vihreänä.
- 3) Kytke laturin A) pistoke (5) 220 V pistorasiaan. Laturin LED-valo muuttuu keltaiseksi. Jos käytetään laturia B), etuosan LED-valo palaa sen sijaan punaisena.
- 4) Kun lataus on valmis, laturin LED-valo muuttuu vihreäksi.
- 5) Irrota ensin laturi (5) ja sitten latausliitin (2) liitännästä (1).

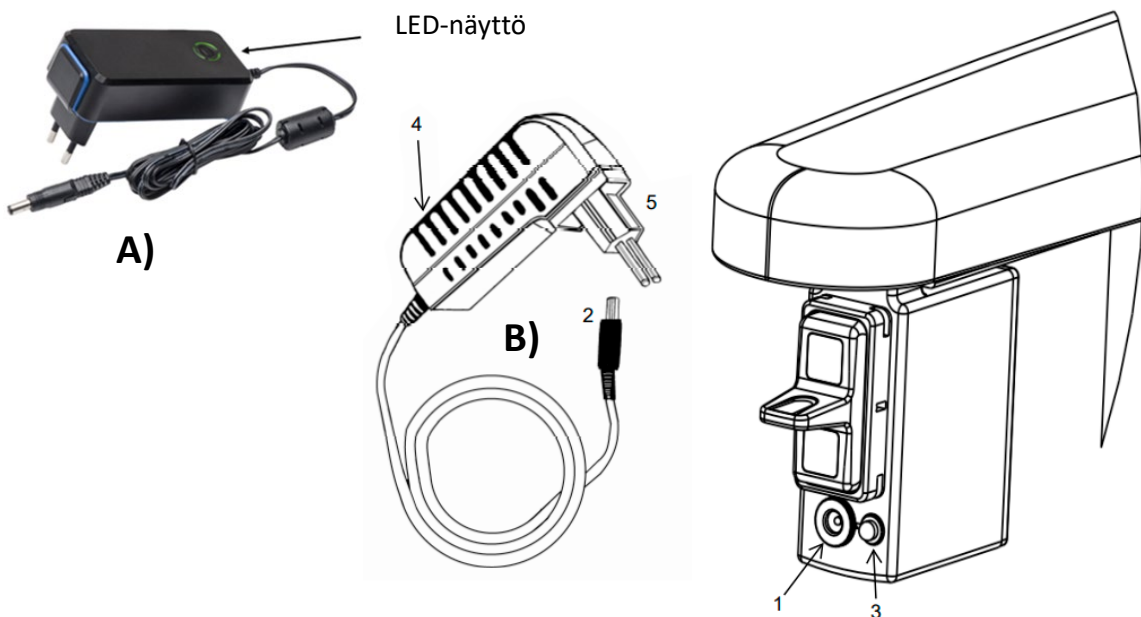

AKUN SJOITTAMINEN

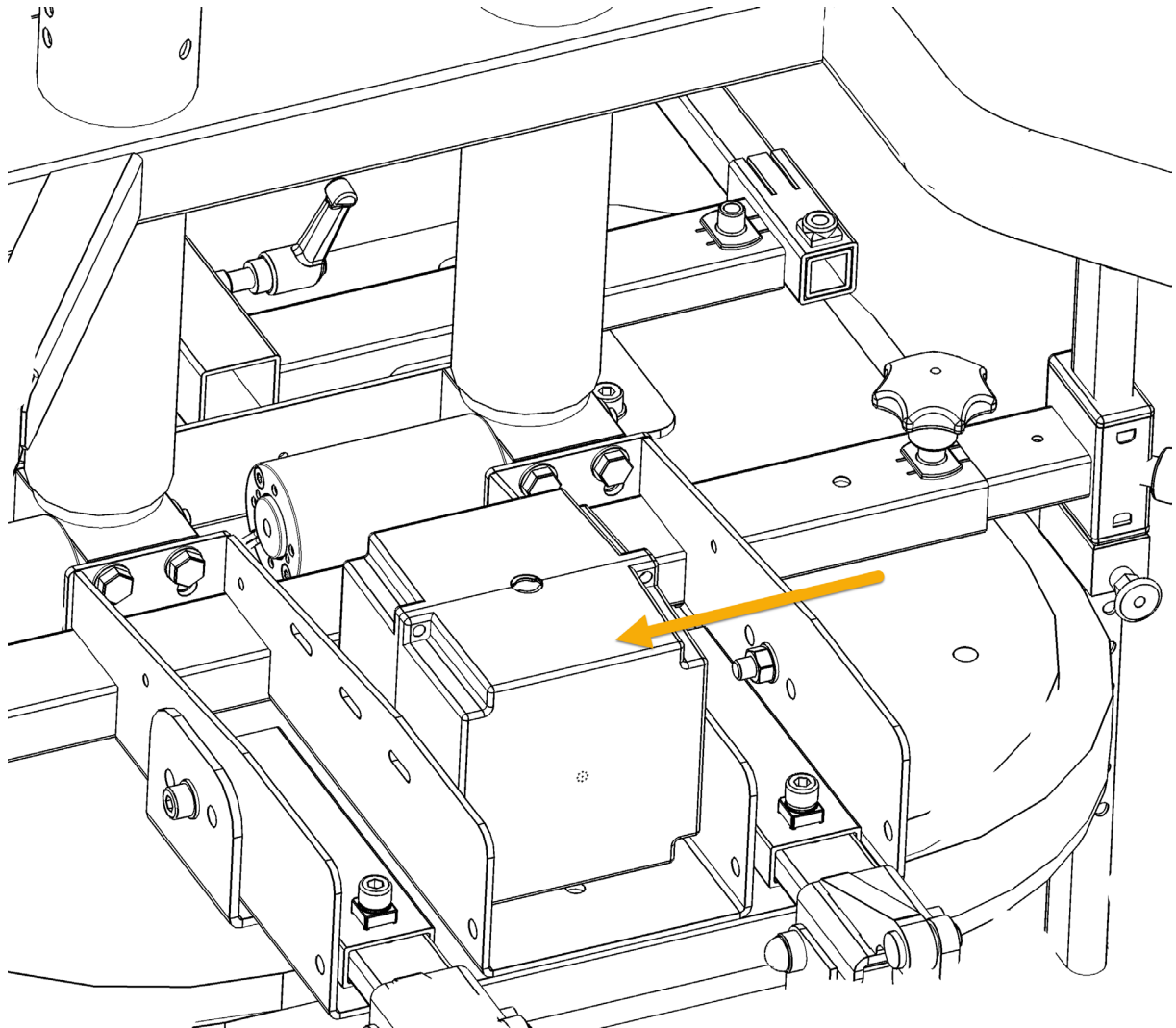

EUROVEMA-ELEKTRONIIKKA

TEKNISET TIEDOT ELEKTRONIIKKA

**Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Eurovemaan.*

Data	Tiedot
Tulojännite	24–40 V
Maks. virranotto	14A
Normaali käyttöjännite	21–28,5V
Maks. moottorivirta per moottori	3,5A
Valmiustilakäyttö	200 uA
Direktiivi	ROHS 2011/65/EY
Suojausluokka	Luokka 2
Suojakotelointi	IP21
Työsykli	Ajoittainen päällä 2 min / pois 18 min

TEKNISET TIEDOT AKKU

Data	Tiedot
Akku	2 kpl sarjaankytkettyjä 12 V 2,9 h
Akkutyyppe	AGM
Maks. purkausvirta	18 A 5 sekuntia
Kotelon materiaali	ABS UL94HB
Akkulaatikon materiaali	Xantar FC19R UL94 V-0
Käyttölämpötila lataus	-15–40 °C
Käyttölämpötila purkautuminen	-15–50 °C
Akku sähköinen versio	FG20291 24 V 2,9 Ah. Lisätietoja on tietolehdessä "FG20291".

AKUN VAIHTAMINEN

Akkua vaihdettaessa koko akkulaatikko vaihdetaan. Katso tämän tekemistä koskevat asennusohjeet kohdasta Akun vaihtaminen.



Akun korjaukset ja muut toimenpiteet akulle saa suorittaa vain Euroveman luvalla. Tuotteessa saa käyttää vain Euroveman hyväksymiä akkuja.

LATURIN SIGNAALIT JA VIKAKOODIT

Tila	LED-valo
Lataus maksimivirralla	Palaa keltaisena
Huippulatauksen vakiojännite	Vilkkuu keltaisena
Täyteen ladattu, ylläpitolataus	Palaa vihreänä
Akkua ei ole kytketty	Vilkkuu vihreänä
Vikakoodit	
Akku kytketty väärällä napaisuudella	2 punaista vilkkuu
Laturin lähtö oikosulussa	3 punaista vilkkuu
Akkujännite liian alhainen	4 punaista vilkkuu
Liian pitkä latausaika	5 punaista vilkkuu
Viallinen akku	6 punaista vilkkuu
Akkujännite liian korkea	LED sammunut

Jotta sähkötoiminnot voidaan kytkeä kokonaan pois päältä, akku on irrotettava, ja tämän saa tehdä vain valtuutettu teknikko. Jos haluat käynnistää tuolin uudelleen, kytke akku takaisin. Katso lisäohjeita huolto-ohjeista.

TEKNISET TIEDOT LATURI

Data	Tiedot
Tulojännite	100–240 V AC 50–60 Hz
Tulovirta	Maks. 0,5A
Lähtövirta	0,56A
Lähtöjännite	29,4V DC maks.
Käyttölämpötila	-15–40 °C
Suojausluokka	Luokka 2
Suojakotelointi	IP41
Malli	Mascot 3743

TEKNISET TIEDOT EXL

Luokka	Työtuoli – ISO 180903
Paino sähkökäyttöinen	51kg
Paino käsikäyttöinen	50kg
Turvallisen kuormituksen paino (käyttäjän paino + lisävarusteet)	285 kg (sähkökäyttö), 285 kg (manuaalinen)
Käyttäjän enimmäispaino	270kg

Istuinkorkeus, sähkö

Istuinkorkeus, sähkö 160 mm	360–520mm
Istuinkorkeus, sähkö 240mm	440–680mm

**Istuinkorkeutta voidaan säätää ylöspäin 1 cm:n välein 7 askeleella. Huomaa, että se vaikuttaa alimpaan istuinkorkeuteen.*

Istuinkorkeus, kaasu

Istuinkorkeus, kaasu 155 mm	400–550mm
Istuinkorkeus, kaasu 200mm	460–660 mm

**Istuinkorkeutta voidaan säätää ylöspäin 1 cm:n välein 8 askeleella. Huomaa, että se vaikuttaa alimpaan istuinkorkeuteen.*

***400N jopa 170 kg, 500N jopa 270 kg*

Istuimen kallistus

Manuaalisesti säädettävissä työkalujen	-3° / 3°
--	----------

Selkänojan kulma

Manuaalisesti säädettävissä	30°
-----------------------------	-----

Muuta

Data	Tiedot
Istuin (leveys x syvyys)	60x45cm, 60x50cm, 70x50cm, 70x55cm
Istuimen leveys (kynänojien välillä)	55–89 cm
Istuimen syvyys	36–53 cm, 44–69 cm
Selkänoja (leveys x korkeus)	55x35 cm, 65x35 cm
Selkänoja, korkeus, säädettävä	34–45 cm
Kynänojan korkeus, säädettävä	8–26 cm
Kynänojaalevy (pituus x leveys x korkeus)	40x8x5 cm
Coxit-istuin (leveys x syvyys)	45x45, 50x50cm
Verhoilu	Musta Atlantic

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Olosuhde	Lämpötila	Ilmankosteus	Ilmanpaine
Normaali käyttö	5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kpa
Varastointi ja kuljetus	-5–40 °C	10–93 % RH	50–106 kPa

TEKNISEET TIEDOT ALUSTA

Data	Tiedot
Alustan leveys	85 cm vipujarruilla (70 cm ilman)
Alustan pituus	71cm vipujarruilla (60cm ilman)
Alustan paino	12,5kg
Jarru	Alustaan asennettu vipujarru
Jarru	Sähköinen Timotion TL16 500N isku 50 mm
Pyörän halkaisija	100mm



Elektronisilla komponenteilla varustetut tuolit voivat häiriintyä radioaalloista, kuten matkapuhelimista.



Elektronisilla komponenteilla varustetut tuolit luokitellaan soveltuvan osan tyyppiin B, suojausluokka II, jossa on sisäinen virtalähde.

LISÄVARUSTELUETTELO

Seuraavat lisävarusteet ovat vaihdettavissa tuotteen toiminnallisuuden muuttamiseksi:

1. Jarrut, käsijarru, mutta myös sähköjarru.
2. Nostopylvästä on saatavana 2 eri korkeutta.
3. Kaasujouset, 2 kokoa 400N ja 500 N

Ota yhteyttä Eurovemaan saadaksesi täydellisen luettelon korjattavista/vaihdettavista osista, vain valtuutetulle henkilöstölle.

HÄVITTÄMINEN

Pysyvästi käytöstä poistetut tuotteet on purettava ja ne on lajiteltava syntypaikalla. Kokoonpano- ja purkamisohjeet löytyvät verkkosivuilta kohdasta Asennusohjeet. Lisäksi räjäytyskuvat löytyvät verkkosivuilta www.eurovema.se kohdasta Räjäytyskuvat

Yksityishenkilöt voivat pyytää lisätietoja Eurovemalta. Eurovema ottaa tällöin vastuun hävittämisestä.

Puretut osat lajitellaan **alla olevan taulukon mukaan**.



Tuotteen purkaminen ei ole vaaratonta, sillä vääränlaisessa käsittelyssä on puristumis- ja palovammavaara. Purkamisen saa suorittaa vain valtuutettu teknikko. P



Metalli	Elektroniikka	Syttyvät
Alusta	Ohjauselektroniikka	Istuimet
Istuinristikko	Liitäntärasiat	Selkänoja
Selkämekanismi	Kaapelit	Kyynärnojatyynt
Kyynärnojatangot	Käsiohjain	Verhoilut
Jalkatuki	Vipusäädin	Niskatukityynt
Lisävarusteiden kiinnitysosat	Akkulaatikko, akut täytyy erottaa	Vartalotukityynt
Istuimen nosto, kaasu	Nostopylväs, sähkö	Muut pehmusteet
Jalkarengas	Toimilaite, sähkö	

Akut

Käytöstä poistetut lyijyakut on vietävä kierrätyskeskukseen.

