


MONTERINGSANVISNING

Amputationsbenstöd



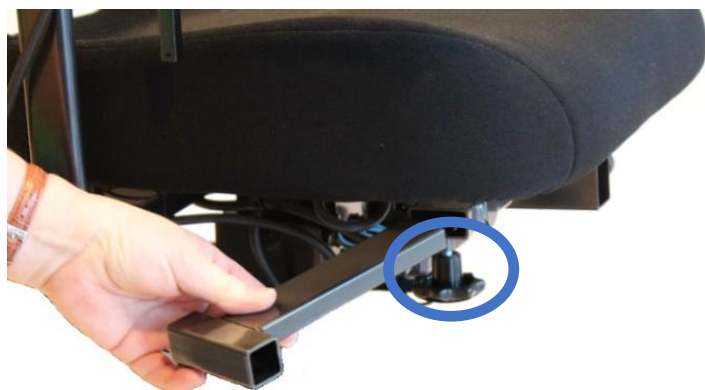


Kombifäste krävs för montering av ben stöd. Sätt in breddjusteringen i kombi fästet.
Skruva åt ratten i kombifästet när bredd justeringen sitter i rätt läge.



För in amputationsbenstödet i breddjusteringen.



Ställ in önskat djup för benstödet. Dra åt skruven.

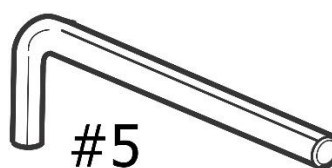



För att justera höjden lossa på Skruven.



För att justera längden på amputationsbenstödet, lossa på skruven och ställ in rätt längd. Drag åt ordentligt.



För att ställa in rätt vinkel lossa spaken och justera. Drag åt spaken när önskad inställning uppnåtts.

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se