

MONTERINGSANVISNING


Ryggstöd EXL Multirygg



Byte av ryggstödsdyna



Ta bort täcklocken nederst på aluminiumprofilerna. Lossa skruvarna så att det går att skjuta upp ryggdynan.

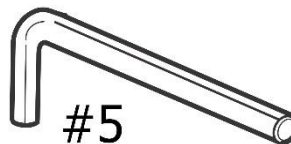

Dra upp dynan och ersätt den med den nya. Ställ in önskad höjd på ryggstödet och dra åt skruvarna.



Det är även möjligt att ta bort ryggstödet genom att lossa låsrattarna och dra upp ryggstolparna. Flytta över ryggstolparna till nya ryggstödet. Montera den nya ryggen och ställ in höjd. Dra åt låsrattarna ordentligt.

*Euro*vema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se