

MONTERINGSANVISNING

Byte batterier HiLo



Byte av batterier




Locket till batterierna är låst med fyra låsklackar och två på undersidan, tryck in dom och ta bort



Skumgummibitarna är till för att hålla batterierna i lådan och ska sättas tillbaka vid montering av batterier.



Ta ut batterierna så att dom vilar mot bromsstången, lossa seriekopplingen mellan batterierna och lossa plus och minus kablarna.

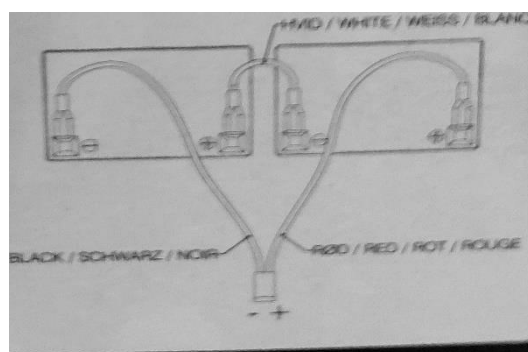

Se etikett i batterilådans lock för kopplingsschema.

Sätt in dom nya batterierna efter att kablarna anslutits, sätt tillbaka skumgummibitarna och tryck fast locket.

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se