

MONTERINGSANVISNING

Byte ställdon sitslyft HiLo







Dra ur ställdonets kontakt ur styrboxen.



Varning! klämrisk

Lägg stolen på sida alternativt blockera chassit så att det inte faller ihop när lyftdonet lossas. Ta bort mutterskydden och lossa muttern, memorera hur brickor och distansbussningar är placerade. Dra ur skruven.

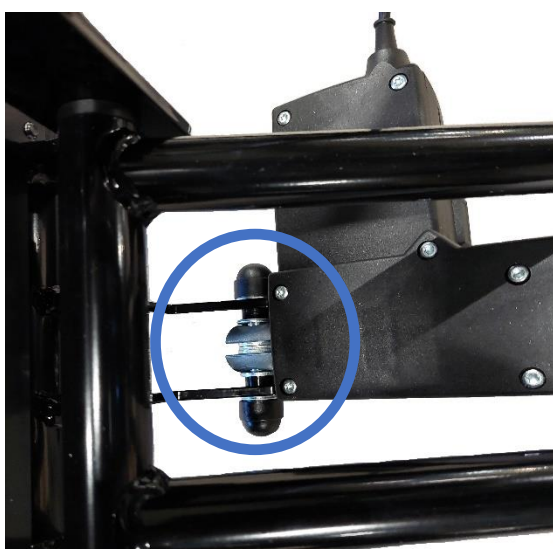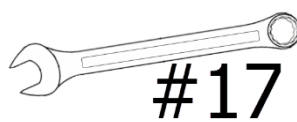

Lossa lyftdonets bakre infästning på samma sätt som den främre infästningen.

Montera nytt ställdon i omvänd ordning.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

*Euro*vema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se