


MONTERINGSANVISNING

Nackstöd SitRite






Lossa på skruven som sitter i rygg
profilen.

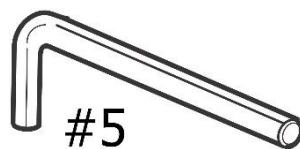

Drag ned ryggstolpen en bit.



Lossa skruven på nackstödet.

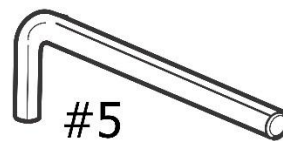

För ned nackstödet i ryggprofilen och skruva fast skruven ordentligt.



För att ställa in nackstödsudden i rätt vinkel, lossa på skruven. När rätt vinkel uppnåtts drag åt skruven ordentligt.



Använd ratten för att justera höjden på nackstödet. När rätt höjd är in ställd, skruva åt ordentligt.



För att justera djupet, lossa skruven i kugglåset. När rätt djup är inställt, skruva åt skruven ordentligt.



Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se