

Vaijerijarrun FSN 104121 vaihto-ohje

Työkalut ja materiaalit:


- ***Kuusiokoloavain, koko 5***
- ***Kiintoavain, koko 8***
- ***Pyörän ruuvi (MC6S M6x20)***
- ***Pyörän aluslevy (6,4x11x1,6)***
- ***Kaapeliside***

Vaijerijarrun FSN 104121 vaihtaminen. (tarkastus

1)


Esiasenustus:

1. Poista kyynärnoja ja selkänoja kokonaan.
2. Käännä tuoli ylösalaisin esimerkiksi pöydälle, jotta työskentely helpottuu.

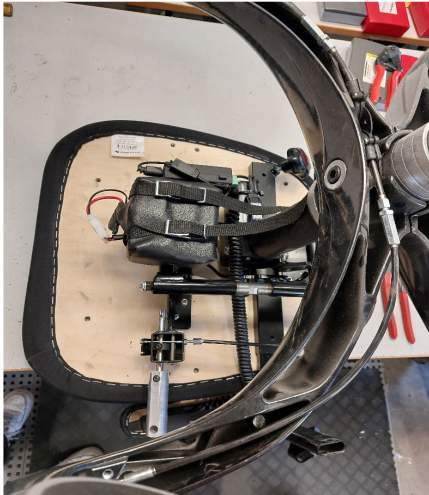


Vaijerijarrun purkaminen:

3. Aloita löysäämällä mutteri koon 8 kiintoavaimella.

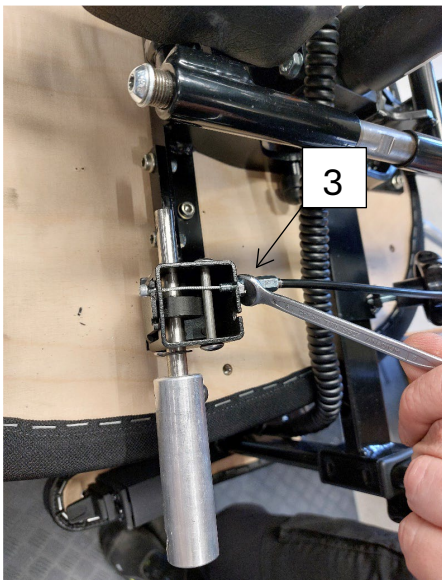


Vaijerijarrun FSN 104121 vaihtaminen. (tarkastus 1)

4. Kierrä säätöruuvia, kunnes vaijeri irtoaa.
5. Irrota vaijeri mustasta kiinnikkeestä.

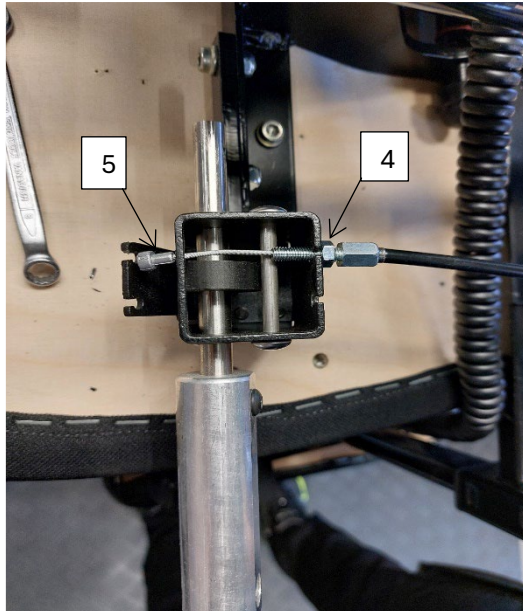


6. Kierrä säätöruuvi irti ja vedä vaijeri ulos jarrukotelosta.

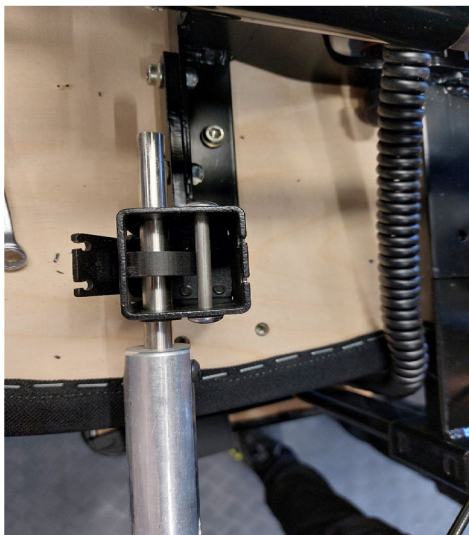


Vaijerijarrun FSN 104121 vaihtaminen. (tarkastus 1)

7. Katkaise kaapeliside ja vedä vaijeri ulos rungosta.

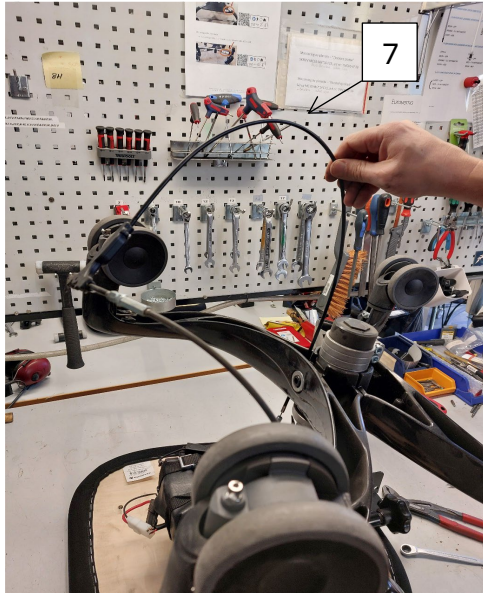


8. Löysää pyörät sen jalkatukipuoliskon puolelta, jossa vaijeri sijaitsee.

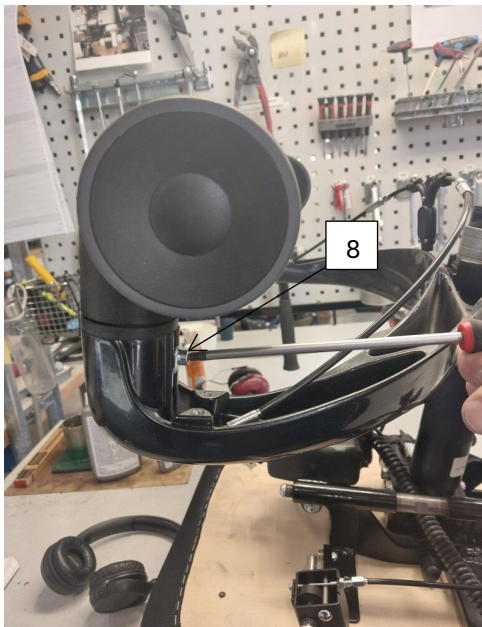

Vaijerijarrun FSN 104121 vaihtaminen. (tarkastus 1)

Uuden vaijerijarrun asentaminen

9. Toimi samalla tavalla, mutta käänteisessä järjestyksessä
10. Kiinnitä vaijerijarru uudella kaapelisiteellä. Varmista, että vaijerijarru on mahdollisimman korkealla.

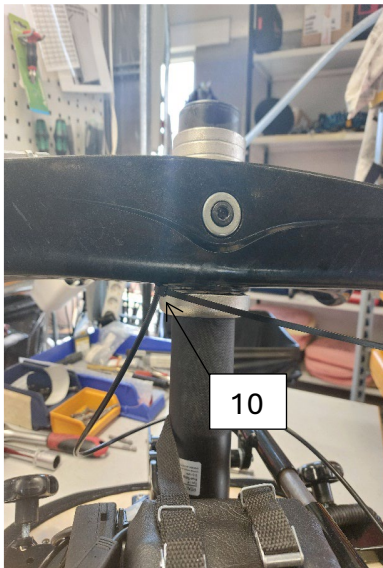

11. Katso myös ohje: Jalkatukipuoliskon FSN 104121 vaihto-ohje

*Vaijerijarrun FSN 104121 vaihtaminen. (tarkastus
1)*