


## Instructions relatives au remplacement d'une jambe FSN 104121

Déposer les jambes et retirer l'ancienne rondelle en caoutchouc SW-00582.

Les pièces suivantes ne sont pas réutilisées : SW-00403, 7MC6S-10\*22 OBEH, FBB 10,2x16x2,5

Lors de l'assemblage des jambes, utiliser 7MC6S-10\*22 OBEH, FBB 10.2x16x2.5, la rondelle FORMA SW-00403 et la rondelle en caoutchouc SW-00582 (on trouve la rondelle en caoutchouc uniquement à l'avant), comme illustré ci-dessous. Appliquer du Loctite vert (LOXEAL 83-52) sur les deux 7MC6S-10\*22 OBEH. Serrer la vis à un couple de 79 Nm.

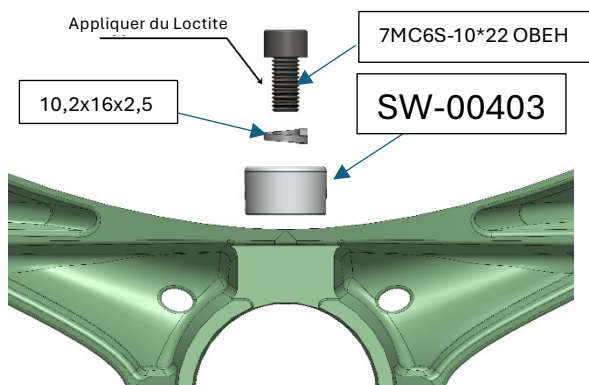

Utiliser les éléments d'assemblage, à savoir MC6S M6x20, la rondelle 6,4x11x1,6 et SW-01544 (vérifier que les quatre attaches sont bien fixées sur la jambe). Appliquer du Loctite bleu (LOXEAL 55-02) sur la vis et la serrer à un couple de 5-7 Nm.

