

Instruktion för byte av vajerbroms FSN 104121

Verktyg och material:

- ***insexnyckel, storlek 5***
- ***Fast nyckel, storlek 8***
- ***Skruv till hjul (MC6S M6x20)***
- ***Bricka till hjul (6,4x11x1,6)***
- ***Buntband***

Byte av vajerbroms FSN 104121. (revision 1)


Förmontering:

1. Ta bort armstöd och ryggstöd helt.
2. Vänd stolen upp och ner, exempelvis på ett bord, för att underlätta arbetet.




Demontering av vajerbroms:

3. Börja med att lossa muttern med en fast nyckel, storlek 8.

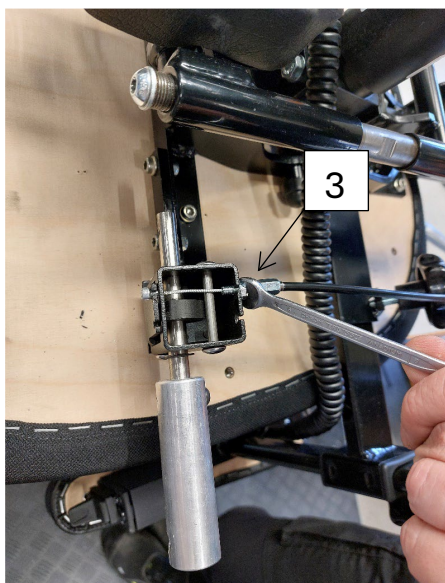


Byte av vajerbroms FSN 104121. (revision 1)

4. Skruva in justeringsskruven tills vajern blir lös.
5. Lossa vajern från det svarta fästet.

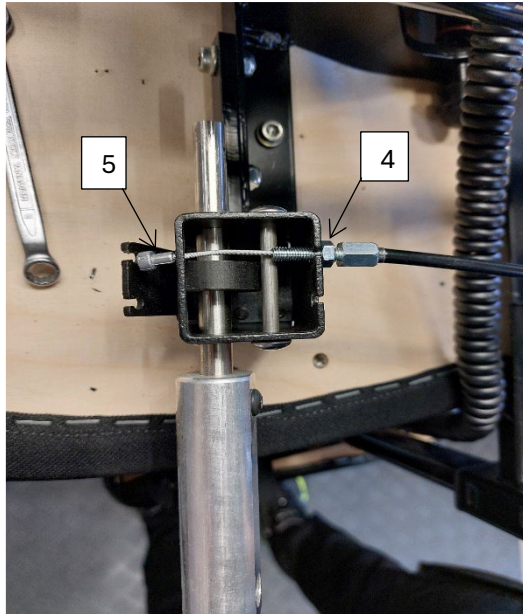


6. Skruva ut justeringsskruven och trä ut vajern ur bromshuset.

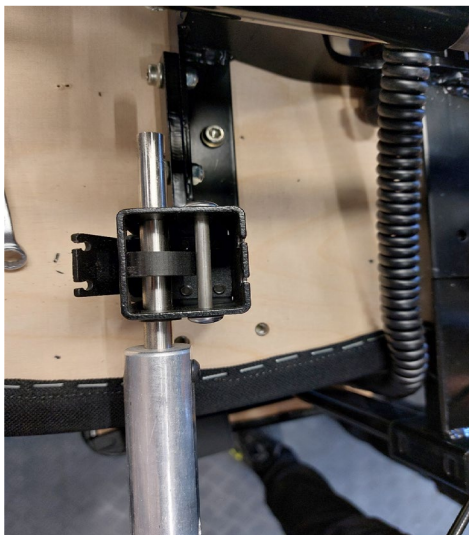


Byte av vajerbroms FSN 104121. (revision 1)

7. Klipp buntbandet och dra ut vajern ur chassit.

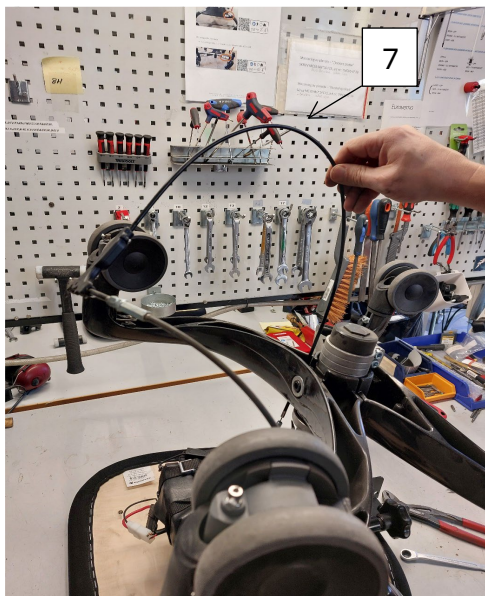


8. Lossa hjulen på den sidan av benhalvan där vajern sitter.

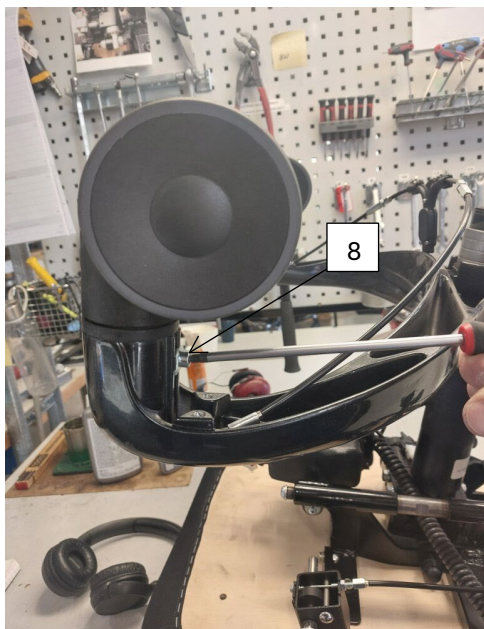

Byte av vajerbroms FSN 104121. (revision 1)

Montering av ny vajerbroms

9. Gör samma process men i omvänd ordning
10. Spänn fast vajerbromsen med ett nytt buntband. Se till att vajerbromsen sitter så högt upp som möjligt.

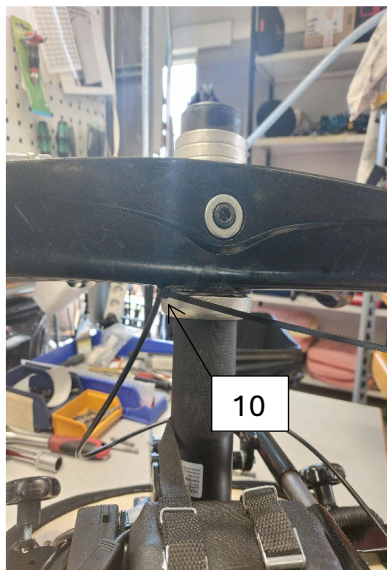

11. För komplettering se Instruktion: Instruktion för Byte av benhalva FSN 104121

Byte av vajerbroms FSN 104121. (revision 1)