

MONTERINGSANVISNING

Bålstöd Classic







Ryggstödet är förberett med gängade hål avsedda för bålstödsfäste. Lokalisera hålen genom att känna med fingret.



Gör hål i klädseln med hjälp av ett vasst föremål.




Lossa beslagen från staget.

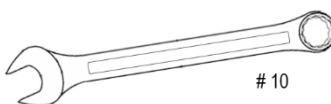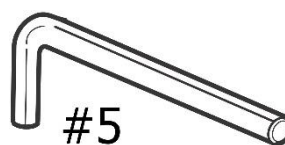




Montera övre och undre beslaget.

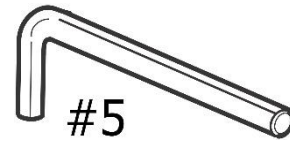

Montera staget.

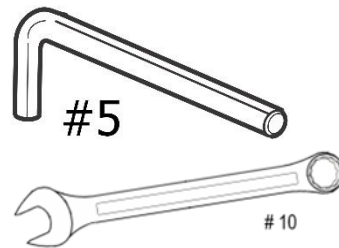

Sätt dit bålstödet i fästet och dra åt låsspaken.

För att justera bålstödet i placering i höjd och sidled lossas spaken.



Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se