


MONTERINGSANVISNING

Gaskolv sitslyft Basic






Lossa skruvarna som låser
gaskolven i chassit.

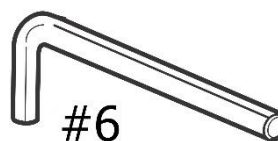


Sänk alternativt ta bort armstöden.
Lyft upp sitsen ur chassit och
placera den upp och ner på
arbetsbord.



Lossa de två genomgående
skruvarna med två blocknycklar.

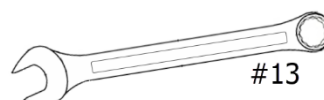

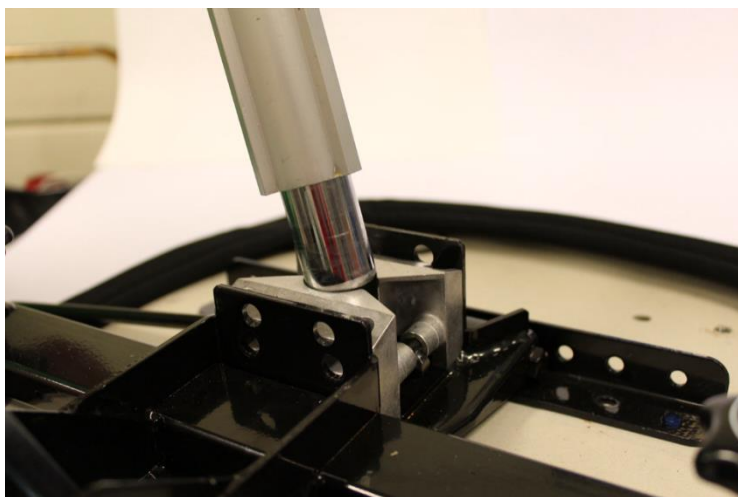

Lossa gaskolven ur klämbäckarna. Montera ny gaskolv i omvänd ordning. Kontrollera att den nya gaskolven bottnar ordentligt i klämbäckarna och dra åt skruvarna ordentligt. Obs det är viktigt att dra båda skruvarna jämn för att gasspaken ska fungera korrekt. Prova funktion belastad och obelastad.

[illegible]



Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se