

MONTERINGSANVISNING

Nackstöd Classic ryggstöd





För att montera dit nackstödet, krävs en hög rygg.


Ryggstödet är förberett med fyra islagsmuttrar innanför klädseln.



Lokalisera hålen och gör hål i klädseln.



Montera fästet med medföljande skruvar.

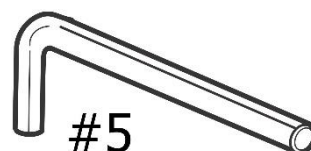


Sätt dit nackstödet i fästet.



Justera in rätt höjd och dra åt skruven.



Vinkeln på nackstödsdynan är justerbar genom att lossa skruven. Dra åt skruven ordentligt när önskad vinkel är inställd.

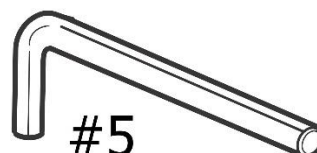

Nackstödet är justerbart i djupled, lossa skruvarna i båda lederna och justera djupet samtidigt som vinkeln på dynan justeras. Dra åt skruvarna ordentligt

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se