

MONTERINGSANVISNING

Nackstöd U-format






Tag bort profilskyddet.



Lossa på skruven

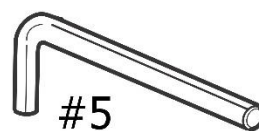

Sätt dit nackstödet i ryggprofilen.
Skruva åt skruven



För att justera vinkeln lossa på skruven.



Justering av nackstödet i djupled kan utföras på två punkter lossa skruven/skruvarna.





Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se