


MONTERINGSANVISNING

Slingback ryggstöd







Använd inte ryggbågen för transport av person!
Körhandtag finns att montera.

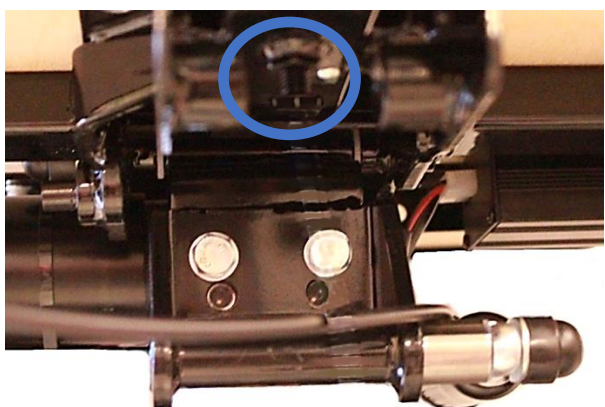


Demontera befintliga ryggstödet genom att lossa skruven, dra ryggstödet bakåt, stoppkulan måste tryckas in när ryggen är utdragen till ändläget.

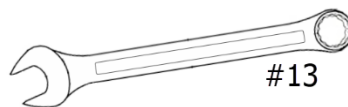

Plocka fram Slingbackfästet.

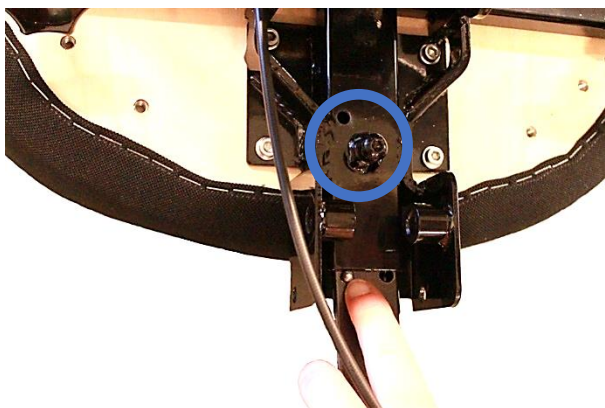


Tryck in stoppkulan och för in slingbackfästet i sittkryssset.

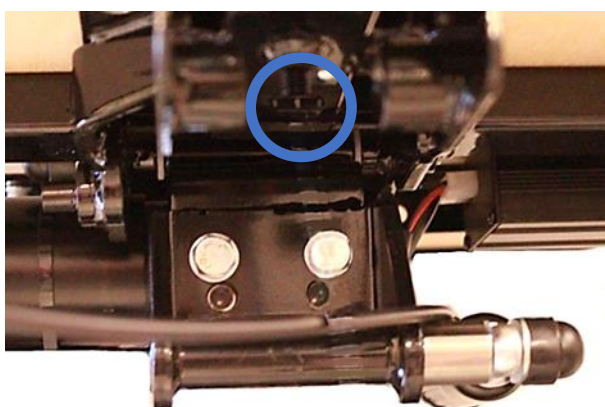


Dra åt skruven efter att önskat sittdjup är inställt.



Montera slingbackryggstödet i fästet.

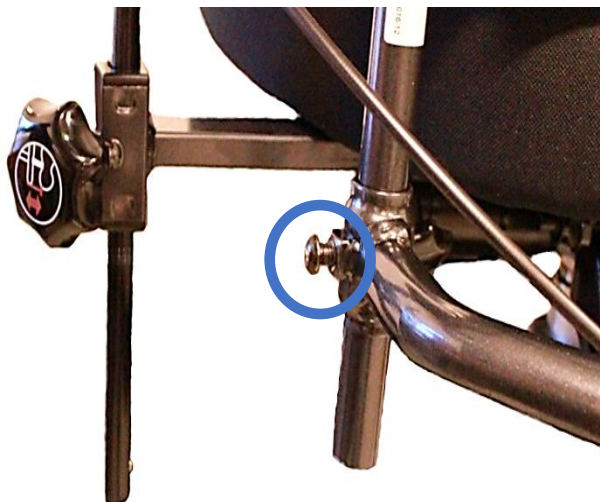

Ställ in önskad höjd på ryggstödet och dra åt skruvarna på båda sidorna.

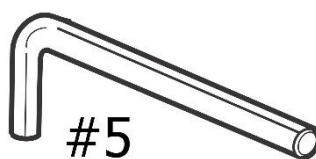

Ryggstödet vinkel är justerbar genom att lossa skruven. Dra åt ordentligt när önskad vinkel är inställd.



Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se