



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Justerbar
Trolli

Mer enn et
foldesystem!



Enkel
håndtering



Avansert design for ubegrenset mobilitet

Justerbar Trolli fra Ormesa er et kompakt og lett **sittesystem** for tenåringer og voksne, ideelt å bevege seg i alle miljøer.

Den er enkel å håndtere takket være det **internasjonalt patenterte systemet** som lar deg **folde den sammen med én enkelt operasjon**. Når den er foldet sammen, **forblir den kompakt og opptar minimal plass**.

Justerbar Trolli har en **stabil og motstandsdyktig struktur** sikret av det doble krysset plassert bak ryggstøtten og under setet som gir større stabilitet og komfort.

Polstringen er **laget med avanserte teknologiske materialer**: den er ekstremt **pustende, motstandsdyktig, lett vaskbar og brannhemmende**. Den er tilgjengelig i **to farger**: rød og svart.

Takket være et bredt utvalg av tilgjengelige komponenter, dekker den enkelt alle behov.



Justerbar Trolli er CRASH TESTET i henhold til **ISO 7176/19** og **ANSI RESNA WC/19** standarder.

PRODUKT
MARKED **CE**

JUSTERBAR TROLI er en MEDISINSK ENHET SOM OVERHOLDER SIKKERHETSKRAV DEFINERT I FORORDNING (EU) 2017/745
INTERNASJONALT PATENT (PATENTERT)



Praktisk og lett

Sjø, fjell, by: ikke noe problem!




Justerbar Trolli har en **foldbar ramme i aluminium**, malt med giftfrie epoksy pulver.

Når den er foldet sammen, forblir den kompakt: dette lar deg trille den på bakhjulene som en reise koffert.

Den **lave vekten** og dens **enkle sammenlegging** gjør den enkel å løfte eller flytte: den er perfekt hvis du trenger å oppbevare den i bilen eller hvis du skal ta offentlig transport.

Justerbar Trolli er den ideelle løsningen for de som leter etter **stabilitet, praktisk og komfort, alt i ett!**

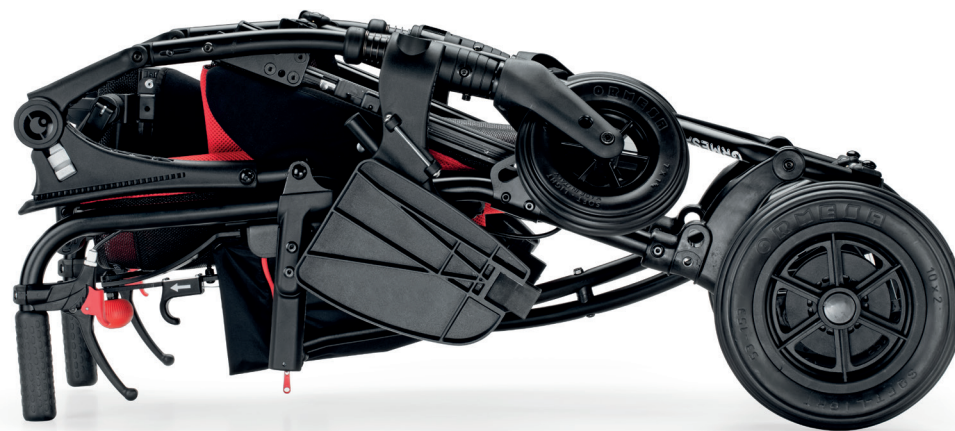

Tekniske egenskaper og justeringer

Polstring

Polstringen til Justerbar Trolli har en myk elastisk struktur, derfor er **den ekstremt pustende i kontakt med huden**. Strukturen til stoffet skaper et "luftkammer" som tillater både **luftsirkulasjon for maksimal pusteevne og en effektiv naturlig termisk isolasjon**.

Dobbeltlaget er en garanti for:

- › **Hygiene:** Takket være den utmerkede pusteevnen reduserer den svette og bakteriedannelse.
- › **Vask:** til tross for at polstringen ikke kan tas av, tillater stoffsammensetningen enkel desinfisering og vask.
- › **Hurtigtørkende.**
- › **Motstand:** Høy motstand mot slitasje. Teksturen med høy motstand opprettholder ytelsen selv ved høye belastninger (ISO 12947-test).
- › **Brannhemmende:** i henhold til EN 1021-1:2014 og EN 1021-2:2014.





Postural hodestøtte

Justerbar i tilt og dybde takket være spaker og høydejusterbar med skrue. Sikker justering uten risiko for å miste skruen. Den låses med barnevognen, det er ikke nødvendig å fjerne den.



Ryggstøtte

Bakoverlent i tre stillinger. Enkel høydejustering ved å skyve, uten risiko for å miste skruen. Det er en pose på baksiden for å oppbevare manualen og den medfølgende skiftenøkkelen. Ryggkorset sikrer stabilitet, komfort og utholdenhet.



Sete

Ergonomisk og lett skråstilt sete for å hindre glidning av bekkenet og sikre større komfort. Justerbar i dybden ved å skyve og i bredden ved å regulere de ekstra polstrede bekkensidestøtter. Enkel justering uten risiko for å miste skruen. Krysset under sørger for stabilitet, komfort og utholdenhet.



Håndtak

Skyvehåndtak med manuell brems og parkeringsbrems. Veldig brukervennlige håndtak for å håndtere vognen i forskjellige miljøer. Høydejustering med komponent 951.



Benstøtte

Justerbar i høyden.

Fotstøtter

Vippe og svingbar fotstøtte i følge med rammen uten belastning. Justering tilt med komponent 956. Leggstøttebåndet er også inkludert for mer komfort.



Hjul

Med "Ormesa Design" original profil. Solide, lette terrenghjul.

Solide svingbare hjul foran. 7" (17 cm) diameter for størrelse 36 og 40; 8" (20 cm) diameter for størrelse 43.

Bakre solide hjul med uavhengige trommelbrems, 10" (25 cm) diameter for størrelse 36 og 40; 12" (30 cm) diameter for størrelse 43. **Fotpedal på begge bakhjul**, for å vippe vogn f.eks. over dørterskel eller fortuskant.

Komponenter



838 Kropp sidestøtter
justerbar i høyde, bredde og rotasjon.
Tilgjengelig i to størrelser.



947 Bekkenbelte med variabel vinkel
Tilgjengelig i to størrelser.



920 Firepunkts bekkenbelte
Tilgjengelig i to størrelser.



853 Vest / sele med glidelås



853 slim firepunkts formet sele



834 Polstret abduksjonsblokk
Avtagbar. Tilgjengelig i to størrelser

Komponenter



839 Håndtak foran

Justerbar i tilt. Lett å ta av for å slå sammen med vognen



960 Hælstøtter



956 Fotstøtter justerbare i tilt



858 Handlekurv



812 Forhjul retningslås



844 Polstret sidebeskyttelsesdeksler

Komponenter



891 Sett med 4 festekroker

for forovervendt transport av barnevognen i motorkjøretøy (privat/biler, busser..).
Se bruker- og vedlikeholdshåndboken som følger med hjelpemidlet.




951 Høydejusterbare kjørehåndtak

Det øker totalhøyden på maks. 7 cm/2,7 in (94-101 cm/37-39,7 in)



Justerbare Trolli størrelser og vektor

Måleenhet cm (in); kg (lb)

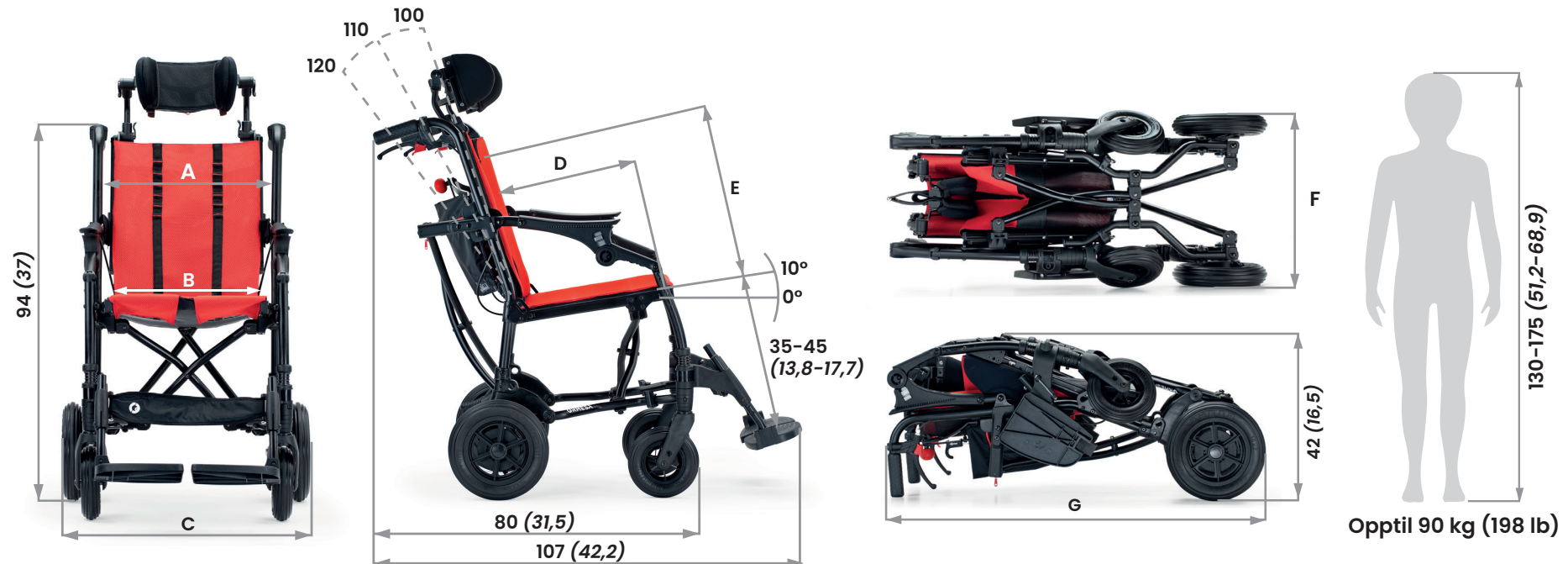


	A	B	C	D	E	F	G	Total vekt
Størrelse 36	39 (15,4)	36 - 32 - 28 * (14,2 - 12,6 - 11 *)	59 (23,2)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	42 (16,5)	94 (37)	15,1 (33,2)
Størrelse 40	43 (16,9)	40 - 36 - 32 * (15,7 - 14,2 - 12,6 *)	63 (24,8)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	46 (18,1)	94 (37)	16,1 (35,4)
Størrelse 43	46 (18,1)	43 - 39 - 35 * (16,9 - 15,4 - 13,8 *)	66 (26)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	42 (16,5)	97 (38,1)	17,1 (37,6)

*ved å bruke de 958 polstrede bekkensidestøttene reduseres bredden med 4 cm (1,6 tommer) eller 8 cm (3,2 tommer) ved å fjerne den indre polstringen. 36-40-43 cm (14,2-15,7-16,9 in) uten polstret bekkensidestøtter.



Ronda AS - Randabergveien 308, 4073 RANDABERG - Telefon 915 72071- mail: post@ronda.no - www.ronda.no

Norsk importør

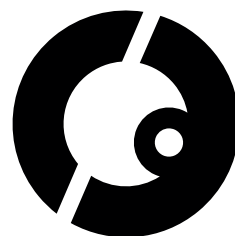

CE i henhold til MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 13485 =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com