

Miniflex Junior SitRite

Miniflex Junior SitRite är en eldriven barnrullstol för inomhusbruk framtagen för att ge god rörelsefrihet. Den är liten och kompakt med elektrisk sitslyft vilket gör att den smidigt kommer nära intill bord och arbetsytor, där det går lätt att anpassa höjden. Sitsen är designad för att ge extra stöd och komfort. Den stabila sittpositionen skapar förutsättningar för ökad uthållighet i sittande och optimerar möjligheten att röra armar och huvud.

Typ av funktionsnedsättning


lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

SitRite

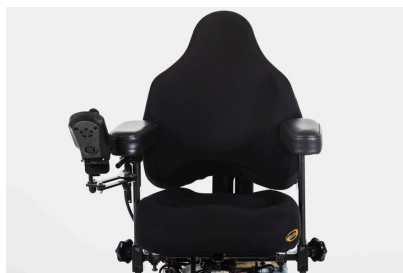

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur formgivning och densitet samspekar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

KLÄDSEL



Svart skai



Svart textil

Sits (bredd x djup)	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	27-52 cm
Sittdjup	32-45 cm
Sitshöjd (höjd till sitsens undersida)	42-60, 47-72 cm
Sitstilt el & gas	-20° till 12°
Sitstilt vev & vantskruv	-16° till 20°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-54 cm
Rygg (bredd x höjd)	30x37, 37x43 cm
Ryggvinkling	30°
Klädsel	Svart Atlantic
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta	25x8x3 cm

Sitthöjd justeras med hjälp av el och finns i hög respektive låg variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "hög, låg".

CHASSI

Miniflex



Marknadens minsta stolchassi för inomhusanvändning är inte större än på en traditionell arbetsstol. Den lättmanövrerade och kompakta konstruktionen gör att det går smidigt att komma nära bord eller arbetsytor. Chassit är framhjulsdrevet med en ledad bakaxel vilket gör att de bakre hjulparen alltid håller kontakt med golvet.

Klass	A
Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	72 cm
Totalvikt	60 kg
Brukarvikt, max	140 kg
Vändradie	120 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körsträcka	ca 15 km
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm
Batteri	12V/18Ah