

Flexmobil i6 Junior SitRite

Med Flexmobil i6 Junior SitRite tar vi mobila hjälpmedel för barn till en ny nivå. Här har vi en innovativ elrullstol för inomhusbruk som ger stor rörelsefrihet hemma, på i skolan och på fritiden. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med generösare sitt höjd och lägre ljudnivå. Det är barnet som får synas och höras – inte stolen.

Typ av funktionsnedsättning


lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

SitRite

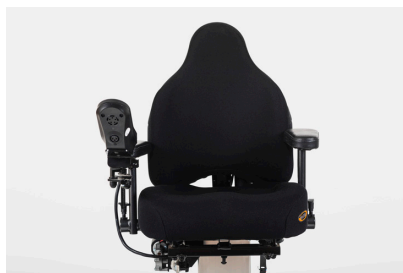

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

KLÄDSEL


 Svart
skai

 Svart
textil

Sits (bredd x djup)	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	27-52 cm
Sittdjup	32-45 cm
Sitshöjd (höjd till sitsens undersida)	36-61, 43-38 cm
Sitslilt el. vev & vantskruv	-14°-20°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-54 cm
Rygg (bredd x höjd)	30x37, 37x43 cm
Ryggvinkling	30°
Klädsel	Svart Atlantic
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta	25x8x3 cm

Sitthöjd justeras med hjälp av el och finns i hög respektive låg variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "hög, låg".

CHASSI

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gör det lätt att både "sitta nära golvet" eller "stå upp och jobba" genom generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

Klass	A
Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	80 cm
Totalvikt	98 kg
Brukarvikt, max	150 kg
Vändradie	96 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körtid	8,5 h
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm