

Flexmobil i6 SitRite

Med Flexmobil i6 SitRite tar vi mobila hjälpmedel till en ny nivå. Här har vi en innovativ elrullstol för inomhusbruk som ger stor rörelsefrihet hemma, på jobbet och på fritiden. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med generösare sitthöjd och lägre ljudnivå. Det är du som syns och hörs – inte stolen.

Typ av funktionsnedsättning


lätt måttlig omfattande

inne ute barn vuxen



SITTSYSTEM

SitRite

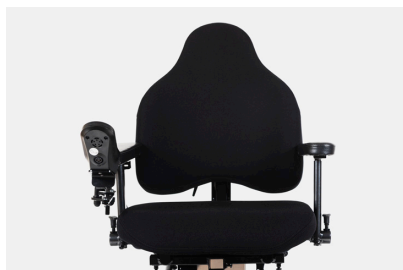

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur formgivning och densitet samspekar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

KLÄDSEL

Svart
skaiSvart
textil

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Sits (bredd x djup) | 40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm |
| Sittbredd (mellan armstöd) | 38-56 cm |
| Sittdjup | 40-59 cm |
| Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) | 36-61, 43-83 cm |
| Sitstill el. vev & vantskruv | -19° till 20° |
| Ryggstöd höjd, ställbart | 37-62 cm |
| Rygg (bredd x höjd) | 37x43, 42x45, 47x47 cm |
| Ryggvinkling | 30° |
| Klädsel | Svart Atlantic |
| Armstöd höjd, justerbart | 0-26 cm |
| Armstödsplatta | 30x8x3 cm |

Sitthöjd justeras med hjälp av el och finns i hög respektive låg variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen "hög, låg".

CHASSI

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gör det lätt att både "sitta nära golvet" eller "stå upp och jobba" genom generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

| | |
|-----------------|------------|
| Klass | A |
| Chassi, bredd | 57 cm |
| Chassi, längd | 80 cm |
| Totalvikt | 98 kg |
| Brukarvikt, max | 150 kg |
| Vändradie | 96 cm |
| Max hastighet | 4 km/h |
| Max körtid | 8,5 h |
| Elektronik | Dynamic/PG |
| Hindertagning | 3 cm |