

Utvald talare
av vetenskapliga
kommittén på:

ISS
2015
NASHVILLE

ISPRM
2017
BUENOS AIRES

ISS
2019
PITTSBURGH

LASS
2019
BUENOS AIRES



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Eurovema

GRILLO





Ett enkelt gånghjälpmedel med oändliga möjligheter.

Grillo är designad för att underlätta den autonoma rörelsen för barn och vuxna.

Grillos originaldesign och **patenterade höjjusteringssystem** gör det **lätt och tryggt att använda**.

Tillgänglig **med öppen eller stängd front**. Tack vare sina olika justeringar och ett brett utbud av tillgängliga stöd är den extremt anpassningsbar, enkel och mångsidig att använda.

PRODUKT-
MÄRKET 

GRILLO är ett hjälpmedel som uppfyller MDR och säkerhetskraven definierade i dokument (EU) 2017/745



Dynamisk ram

Gångtränare med optimal tyngdpunkt

Grillo växer med dig

Med sin extremt lätta aluminiumram är **Grillo lätt att skjuta och manövrera** för dig med nedsatt motorik och balans, och kan enkelt fällas ihop för förvaring och transport.

Den har ett gasfjädersystem som möjliggör säker och enkel justering av ramen, även vid användning,

oavsett om den är stilla eller i rörelse. **Den optimala tyngdpunkten för höjdjustering** gör att en Grillo, av bara en storlek, kan anpassa sig till ett barns tillväxt under lång tid.







Konfigurerbar för att anpassas till alla behov



PT-Konfiguration framåtvänd med bäckenstöd, bröststöd, handtag och ergonomisk sits.

För användare som behöver både bäckenstöd och bröststöd. De två oberoende stöden tillåter framåtböjning av kroppen för att underlätta gångcykeln.

SIZE
mini

SIZE
S

SIZE
M

SIZE
L



PT-konfiguration bakåtvänd med bäckenstöd, handbygel och ergonomisk sadel.

För användare som behöver både bäcken- och bröststöd. De två oberoende stöden tillåter framåtböjning av överkroppen för att underlätta gångcykeln.

SIZE
mini

SIZE
S

SIZE
M

SIZE
L

Oberoende anatomiska stöd för överkropp och bäcken

Mångsidigheten, anpassningsförmågan och ergonomin säkerställer säkerhet, stabilitet och stöd hela vägen för användaren när de står och går.

De stödjer användarens kropp utan att tvinga fram positionering eller rörelse.

Designad och byggd för att ge samma **känsla av trygghet och stöd** som en förälder som stödjer sitt barn.

De anatomiska stöden finns i 4 storlekar, precis som ramarna. För att möta de specifika behoven hos en användare, till exempel en mycket lång och smal person, **är det dock bättre att använda stöd av mindre storlek än ramen.**



Stödstorlek S, ramstorlek M



Exakta, kontinuerliga justeringar

Alla justeringar görs med spakar eller justerbara säkerhetshandtag utan behov av verktyg. Detta möjliggör säkra och enkla justeringar och modifieringar, **även under användning**. Det gör det också enkelt att lägga till och ta bort utbytbara stöd.



Vinkeljustering.



Omkrets och breddjustering.



Höjdjustering (bäckenstorlek L kan endast justeras med ramen).



Justering fram och bak.





Graderad skala

Dessa finns på alla justerbara stöd och gör att en **specifik position kan ställas in eller återställas av terapeuten**, efter att ha stängt ramen eller att den används av en annan användare, vilket undviker risken för felaktig justering av hjälpmedlet.



Snabb och enkel montering

Grillo kan fällas ihop i en rörelse för kompakt förvaring och enkel transport.
Ramen fälls ihop utan att stödet behöver tas bort.

Hjul designade av Ormesa som passar alla ytor

Bakhjul med:

- › **Backbroms:** som förhindrar rörelse bakåt. Lämplig för användare utan bra huvud- eller kroppskontroll som använder enheten för första gången.
- › **Justerbar släpbroms:** 5 justeringslägen för att minska gånghastigheten
- › **Kompatibel med handbroms.**
- › **Parkeringsbroms:** den manövreras enkelt med den röda pedalen. Användbar för att placera användaren och för transport.

Svängbara framhjul med:

- › **Svängbara hjul:** med riktningsspärr som hindrar framhjulen från att svänga, garanterar linjär stabilitet och låter användaren fokusera uteslutande på framdrivning och inte på styrning.
- › **Genom att vrida på hjulen är det möjligt att förvandla en "ÖPPEN" frontkonfiguration till en "STÄNGD"-konfiguration och vice versa.**

Hjul- dimensioner:



fram	15 cm	15 cm	17,5cm	17,5 cm
bak	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm



Tillbehör



Multijusterbart nackstöd

	Mini	S/M/L
Art.nr.	102999	102968



Bröststöd

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103638	103639	103640	103641



Bäckenstöd

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103634	103635	103636	103637



Ergonomisk sele

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103631	103631	103632	103633



Justerbar handbygel

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103622	103586	103587	103599



Armstöd

	S/M hö	S/M vän	M/L hö	M/L vän
Art.nr.	103576hö	103576vän	103614hö	103614vän



Armband

	S	M/L
Art.nr.	103615	103616



Armstöd för storlek mini

	Mini/S	Mini/S
Art.nr.	103617hö	103617vå



Armband för storlek mini

	Mini/S
Art.nr.	103629



Ergonomiska handtag

Art.nr.	102974
---------	--------



Avtagbara handtag


	Mini	S/M/L
Art.nr.	103618	103588



Ländryggsstöd

	S	M
Art.nr.	102792	102793

Tillbehör

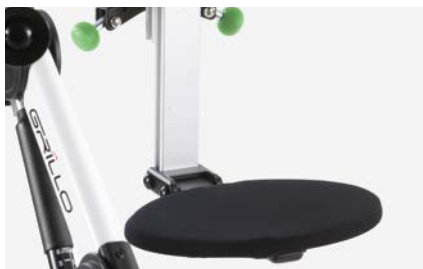

Fällbar sits

	S	M
Art.nr.	102778	102779



Nedfällbar sadel

	Mini/S	M	L
Art.nr.	103601	103603	103604



Ergonomisk sadel

	Mini	S	M/L
Art.nr.	103648	103651	103652



Ledsagarstång

	Mini/S/M/L hö	Mini/S/M/L vän
Art.nr.	103581	103643



Benavdelare med remmar

	S	M	L
Art.nr.	102808	102809	102810



Vadderade benavdelare

	Mini	S	M	L
Art.nr.	102961	102811	102812	102815



Viktstänger (extra vikt)

	S	M
Art.nr.	105604	105605



Bakhjul för breddjustering med parkeringsbromspedaler

	M/L hö	M/L vän
Art.nr.	103656hö	103656vän



Handbroms

	S	M	L
Art.nr.	102932R	102939	102943



Grillo öppen och stängd front

storlekar och vikt

A: höjd från mark till bröststöd
 B: höjd från mark till bäckenstöd
 C: längd stativ
 D: total bredd
 E: bredd på inre stöd
 F: omkrets av stöd
 G: användarhöjd
 Totalvikt
 Maximal belastning

mini

från 51 till 75 cm
 från 42 till 61 cm
 74,5 cm
 62 cm
 från 19 till 25 cm
 från 53 till 79 cm
 från 75 till 95 cm
 15 kg
 35 kg

small



från 66 till 100 cm
 från 49 till 84 cm
 75 cm
 69 cm
 från 19 till 25 cm
 från 60 till 86 cm
 från 90 till 135 cm
 19 kg
 45 kg

medium

från 73 till 124 cm
 från 54 till 100 cm
 91 cm
 76 cm
 från 22 till 36 cm
 från 74 till 120 cm
 från 110 till 165 cm
 22,5 kg
 90 kg

large

från 84 till 147 cm
 från 63 till 120 cm
 111 cm
 80 cm
 från 24 till 40 cm
 från 81 till 140 cm
 från 150 till 190 cm
 29,5 kg
 110 kg

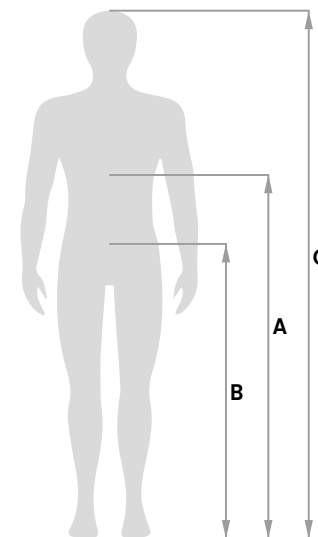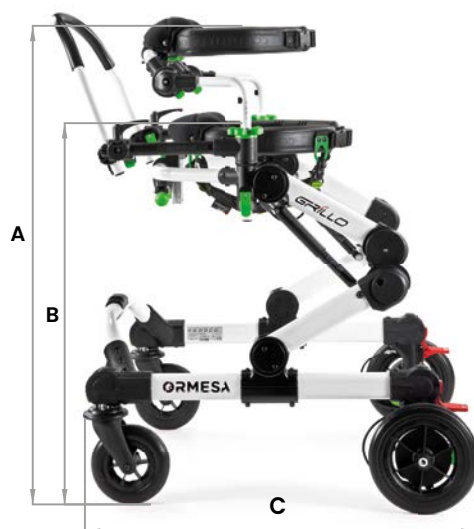


Se till att måtten A och B som anges i figuren inte överstiger det föreslagna intervaller som anges för stöden.







Titta på filmen
om Grillo!

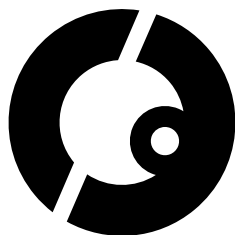

**Ett särskilt tack till de familjer som entusiastiskt deltog
i vårt projekt. Det är tack vare våra kunder och deras
berättelser som vi hittar energi och stimulans till att
utvecklas varje dag.**

Tillverkare:

CE Överensstämmelse med EU:s regelverk MDR 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

Eurovema

Svensk importör: Eurovema Mobility AB
info@eurovema.se | 0371 390 100