

Flexmobil i6 Junior SitRite

Flexmobil i6 är en elektrisk rullstol för inomhusbruk. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med en lyfthöjd på upp till 40 cm. Kombinerat med den negativa tilten medger detta en god uppresningshjälp. Ljudnivån på motorer och ställdon är låg för att möta förväntningar på en rullstol anpassad för inomhusbruk.

Typ av funktionsnedsättning

☒ lätt

☒ måttlig

☒ omfattande

☒ inne

☐ ute


☒ barn

☐ vuxen



SITTSYSTEM

SitRite

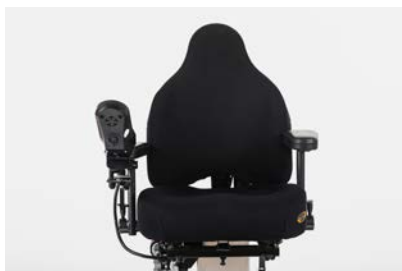

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god position medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att vara tjockare under sittbenen än under låren.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. Modellen SitRite LS (Lateral Support) har en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korregerbar scolios. De omslutande sidorna är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar som kan justeras med användaren i sittande läge.

Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd.

KLÄDSEL



Svart
textil

Sits (bredd x djup)	29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm
Sittbredd (mellan armstöd)	27-52 cm
Sittdjup	32-45 cm
Sitshöjd *	36-61, 43-83 cm
Sitstilt el, vev & vantskruv	-14° till 20°
Ryggstöd höjd, ställbart	37-54 cm
Rygg (bredd x höjd) - SitRite - SitRite LS	25x32, 27x37, 35x43 cm 14x32, 17x37, 24x43 cm
Ryggvinkling	30°
Armstöd höjd, justerbart	0-26 cm
Armstödsplatta	25x8x3 cm

* Sitthöjden justeras med hjälp av lyftpelare tillgänglig i två modeller; låg 25 cm, respektive hög 40 cm. Sitthöjd mäts som höjd till under sitsen.

CHASSI

Flexmobil i6



Flexmobil i6 gör det lätt att både "sitta nära golvet" eller "stå upp och jobba" genom generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

Chassi, bredd	57 cm
Chassi, längd	80 cm
Totalvikt	98 kg
Brukarvikt, max	150 kg
Vändradie	55 cm
Max hastighet	4 km/h
Max körtid	8,5 h
Elektronik	Dynamic/PG
Hindertagning	3 cm
Drivhjulsstorlek	225 mm
Länkhjulsstorlek	125 mm